

■ ■ wissner-  
■ ■ bossenhoff

Funktional. Intelligent. Menschlich.


## eleganza 2

Das Universalsbett im Kliniklook



# eleganza 2

Ihre Mehr-Werte

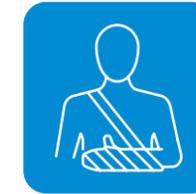

## Patient

- Hoher Patientenkomfort durch integrierte Bedienelemente
- Mehr Sicherheit in der Nacht durch SafeSense® und SafeSense®3
- Unterstützung und Förderung eigener Ressourcen durch gezielte Mobilisierungselemente



## Pflegepersonal

- Unterstützung von Pflegeabläufen durch optionalen Fußschalter
- Einfache hygienische Aufbereitung durch flächige und entnehmbare Kunststoffelemente
- Sichere Positionierung von Patienten durch automatischen 30° Rückenlehnen Stopp



## Management

- Universalbett für vielfältige klinische Einsatzbereiche
- Vorbereitet für die Zukunft durch die Integration eines digitalen Assistenzsystems

# Mobilisationskonzept

Unterstützung individueller Ressourcen



Durch das vermehrte Platzangebot unter den abgesenkten Seitensicherungen kann der Patient seine Füße direkt unter dem Körperschwerpunkt platzieren. Individuelle Mobilisierungsschritte können so durch eine optimale und sichere Standposition mit weniger Kraftaufwand für Patient und Pflegekraft unterstützt werden.



## MOBI-LIFT®

Die in die Kunststoff-Seitensicherung integrierte MOBI-LIFT®-Taste ermöglicht eine komfortable und sichere Höhenverstellung während der Mobilisation. Sie fördert individuelle Ressourcen und gibt Sicherheit während einzelner Mobilisationsschritte.



**Ergonomischer Handlauf**  
Der ergonomisch geformte Handlauf ist gut geeignet für einen komfortablen und sicheren Bettausstieg.



Unabhängigkeit bei der Mobilisierung



Unterstützung im Pflegeprozess



Universeller Einsatz des Bettes

# Präventionskonzept

Das Plus an Sicherheit

Obwohl das Bett ein sicherer Ort für den Patienten sein sollte, können Stürze aus dem Bett eine Herausforderung für Kliniken darstellen. Das eleganza 2 bietet ein Plus an zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen.



## Sturz- und Verletzungsprävention

- 4 Safe-Seitensicherungen – kein zusätzlicher Protektor notwendig, da die gesamte Liegefläche abgedeckt wird.
- Design der Seitensicherungen – optimierte Unterstützung für einen sicheren Bettaus- und -einstieg.
- Bremsalarm – Hinweis auf ein ungebremstes Bett.
- Schaltbares Nachtlicht – für mehr Orientierung und Sicherheit in der Nacht.
- Konzept der sicheren Abstände – Verringerung der Einklemmgefahr bei sich ändernden Bettpositionierungen.



## Sichere Schlafhöhe

Hintergrundbeleuchtete Winkelanzeige – „Grün“ = Bett befindet sich in der Position der sicheren Schlafhöhe.



## Keine Kollision

Feststehendes Kopfteil – reduzierte Kollisionsgefahren: bei einer Positionsveränderung des Bettes bewegt sich nur die Liegefläche (Aufrichter und Infusionsständer behalten ihre Positionshöhe).



# Präventionskonzept

Dekubitusprävention & Komfort

Ein hoher Liegekomfort steht beim eleganza 2 im Mittelpunkt. Die Liegefläche des eleganza 2 wurde den speziellen Anforderungen in Kliniken angepasst.



## Liegefläche

- Hoher Liegekomfort durch ein Matratzenmaß von 90 cm.
- Verbesserter Liegekomfort durch speziell konzipierte Liegeflächenelemente mit einer gezielten Luftzirkulation.
- Matratzenschutz gegen Feuchtigkeit durch speziell geformte Liegeflächenelemente, die Flüssigkeiten ableiten.
- Entnehmbare Liegeflächenelemente für eine einfache, gezielte und schnelle hygienische Aufbereitung des Bettes.




## Automatischer Rückzug

Durch eine besondere Mechanik der Rückenlehne wird der Raum im Hüftbereich um 11 cm vergrößert. Dies führt zu einer Verringerung von Druck- und Reibungskräften auf das Gewebe, die Risikofaktoren für die Entstehung eines Dekubitus sein können.



## Flexible Betteinstellung

Komfort auch für größere Patienten durch die eingebaute Bettverlängerung von bis zu 32 cm.

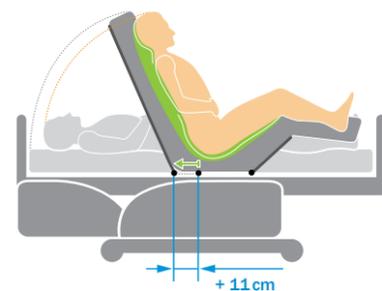

# Transportkonzept

Einfach und sicher unterwegs

Die ausgezeichneten Transporteigenschaften des eleganza 2 erleichtern die Arbeit der Pflege. Dank der 5ten Rolle ist das Bett leicht zu lenken, und ein rückschonendes Manövrieren auf langen Fluren und in engen Räumen kann ermöglicht werden. Das eleganza 2 ist mit zahlreichen Bettentranporteinheiten kompatibel.



## 5te Rolle

- Vereinfachter Transport durch zusätzliche Fahrrolle.
- Sicheres Drehen und Lenken auch in engen Räumlichkeiten durch Drehpunkt in Bettmitte.
- Stabile Geradeausfahrt bei langen Strecken durch gute Laufeigenschaften der 5ten Rolle.



## Handgriff am Bett

- Gute Führung des Bettes durch ergonomische Form des Kopf- und Fußhauptes mit vertikalen Griffelementen.



# Raumkonzept mit eleganza 2

Die umfassende Raumausstattung für die Akutpflege bietet Innovation, Funktionalität, maximale Sicherheit, hochwertiges Design und einen hohen Komfort für Patienten sowie ein ergonomisches Arbeiten im Klinikalltag.

Bett

Matratze

Nachttisch

Server



# Pflegebedienelement

## Große Auswahl an Bedienelementen

ermöglichen der Pflegekraft ein effektives und ergonomisches Arbeiten mit dem Bett. Die voreingestellten Automatikfunktionen sind praktisch und komfortabel für die Pflegekraft und den Patienten.



**Automatischer Stop der Rückenlehne bei 30°**  
Bei der Positionierung stoppt die Rückenlehne automatisch in der am häufigsten verwendeten Position von 30°.



**Herzstuhlposition**  
Die Position unterstützt die Atmung des Patienten. Die Sitzposition erhöht den Komfort des Patienten z. B. beim Lesen und Essen.



**Schaltbare Beleuchtung**  
Je nach Notwendigkeit können alle Bettleuchten abgeschaltet werden - Nachtlicht, beleuchtete Winkelanzeigen, Handschalter und in die Seitensicherung integrierte Bedienelemente.



**GO Taste**  
Durch Drücken der ‚GO‘-Taste wird das Bedienfeld für einen Zeitraum von 3 Minuten ab der letzten Betätigung aktiviert. Nach Ablauf der Aktivierungszeit werden die Bedienelemente wieder automatisch gesperrt und können nicht versehentlich aktiviert werden.

# eleganza 2 junior kit



**Geteilte Seitensicherung**  
Das Junior Kit bietet eine geteilte Seitensicherungslösung mit für pädiatrische Patienten optimierten Abständen zur Sturzprävention und reduziertem Klemmrisiko.



**Mobilisation**  
Die Seitensicherungen bieten dem Patienten Halt bei der Mobilisation.



**Komfort**  
Auch für Erwachsene oder großgewachsene Jugendliche geeignet. (Liegefläche: 90 x 200 cm)



**Hubsäulen**  
Die Hubsäulenkonstruktion erleichtert die Aufbereitung des Bettes und ermöglicht eine sichere Arbeitslast von bis zu 250 kg.

# SafeSense® 3 – intelligent vernetzt für die Zukunft

Machen Sie Ihr Krankenhaus zukunftsfähig durch das KHZG\*.

Die Zeit ist reif ... für SafeSense® 3 in eleganza 2  
Nach über 6 Jahren Erfahrung mit integrierter Bed-Exit-Sensorik ist jetzt die Zeit für einen echten digitalen Pflegeassistenten gekommen.

NEU



- +** Digitale Pflege
  - Rund um die Uhr den Patienten im Blick
  - Probleme frühzeitig erkennen, wie z. B. Schlafstörungen, Schmerzen oder Stress
  - Priorisierung von Prozessabläufen

- +** Pflege-Monitor  
Echtzeitmonitoring mit Datenvisualisierung



- +** Dekubitus-Prävention durch Bewegungs-Monitoring

- +** Sturz-Prävention durch Bed-Exit-Monitoring

- +** Sicherheit  
Schutz der Patienteninformationen durch verschlüsselte Datenübertragung und dezentrale Datenverarbeitung

- +** Zukunftssicherheit
  - Flexible IT-Architektur
  - Nachrüstbar für weitere Sensorik
  - Regelmäßige Software-Updates

- +** Pflegebedienelement mit SafeSense®3-Funktion

NEU



- +** Patentierte Bettsensorik  
Assistenz für die Pflege



- +** Mobile Endgeräte  
Jederzeit alle Daten im Blick



- +** Schwesternruf-Anschluss  
Ein Plus an Sicherheit bei Nacht- und Wochenendschichten



# Die Lebensdauer Ihres Bettenportfolios erhöhen

Entdecken Sie das wibo Service-Angebot



## Vertragsbestandteile

Service	Sicherheitstechnische Prüfung*	Wartungsvertrag	Voll-Wartungsvertrag
Jährliche Prüfung und Kontrolle gemäß MPG	✓	✓	✓
Prüfbericht und Prüfprotokolle	✓	✓	✓
Inspektion Elektrik und Funktionen		✓	✓
Wartung nach Herstellervorgaben		✓	✓
Mängelbehebung während der Wartung		✓	✓
Ersatzteile und Montage inkludiert			✓

\* jährliche Prüfung nach DGUV V3

## Wir bieten maßgeschneiderte Service-Lösungen

Ihre Vorteile sind:

- Schnelle Verfügbarkeit, autorisierter Servicetechniker
- Schnelle Ersatzteilverfügbarkeit
- Ersatzteilverfügbarkeit bis zu 15 Jahre
- Ersatzteile im Online Shop
- Kundenspezifische Instandhaltungsprozesse – sprechen Sie uns an!



## Mehr Informationen

Tel. +49 2377 784-456  
[service@wi-bo.de](mailto:service@wi-bo.de)

# Praktische Details

- 1 Fußschalter  
Praktische Fußschalter für eine einfache Höheneinstellung des Bettes
- 2 Horizontale Wandabweisrollen schützen das Bett
- 3 Liegefläche  
Die leicht zu reinigende Liegefläche ist kompatibel mit 86 oder 90 cm Matratzen
- 4 Integrierte Bettzeugablage  
Kann auch zur Aufbewahrung der Pflegebedieneinheit genutzt werden
- 5 Mechanische CPR  
Zusätzlich zur elektrischen CPR in Notfallsituationen



## Elektrische Daten

Stromversorgung	±10% 230 V Standard (110 V, 127 V optional)
Maximale Stromzufuhr	max 1,6A; 370VA
Schutzklasse	IPX4 Sicherheitserdung mit elektrischer Klasse I für maximale Patientensicherheit

## Technische Angaben

Äußere Abmessung	223,5 × 99,5 cm	Höhe der geteilten Seitensicherungen	40 cm
Bettverlängerung	32 cm	Bettgewicht	156 kg
Höhe (Höhenverstellung)	39,5–77,5 cm	Sichere Arbeitslast	250 kg
Innere Abmessung (kompatible Matratzenbreite)	200 × 90 cm / (90 und 86 cm)	Max. Patientengewicht	185 kg
Max. Matratzenhöhe	Geteilte Seitensicherungen 14 cm 3/4 Seitensicherungen 12 cm + 10 cm Erweiterung	Liegeflächenrückzug	11 cm
		Max. Verstellwinkel der Rückenlehne	64°
Max. Matratzenhöhe bei flacher ABS Liegefläche	Geteilte Seitensicherungen 18 cm 3/4 Seitensicherungen 16 cm + 10 cm Erweiterung	Max. Verstellwinkel der Oberschenkellehne	32°
		Unterschenkellehne	15°
		TR/ATR Winkel	16°/16°
		Max. Belastbarkeit des Aufrichters	75 kg
		Unterfahrbarkeit	15 cm



**wissner-bosserhoff GmbH**

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr) | Deutschland  
Tel. +49 2377 784-0 | Fax -163 | info@wi-bo.de | wi-bo.de



**Bigla Care AG**

Bahnhofstrasse 4 | CH-3507 Biglen | Switzerland  
Tel.: +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch

---

Members of LINET Group

