

TBM



Sonnenbett „Sinne-Bêdsje ZERO“

Kinderkrankenbett für die Normalstation



Das Kinderkrankenbett „Sinne-Bêdsje ZERO“ ist ein modernes Bett für kleine Patienten.

Es ist für das Pflegepersonal flexibel zugänglich aufgrund der unter die Liegefläche schwenkenden Seitengitter und den herausnehmbaren Kopf- und Fußteilen.



+ Flexibilität

Wählbare Liegefläche in den Maßen 120 cm und 150 cm mit einer Liegeflächenbreite von 80 cm. 1-teilige Liegefläche mit mechanischer T-Verstellung (12°)



+ Sicherheit und Komfort

Seitengitter schwenken unter der Liegefläche ein für optimalen Komfort für Pflegepersonal und Eltern und sind in drei Positionen verstellbar



+ Höhenverstellung

Feste Höhe von 80 cm. Höchste Position der Seitengitter 800 mm mit Abstand der Gitterstäbe 60 mm




+ Bremssystem

2 Rollen diagonal bremsbar, Rollendurchmesser 125 mm



+ Bedienbarkeit

Kopf- und Fußteil mit herausnehmbaren Einsätzen ermöglicht, dass Versorgungsschläuche und Leitungen immer mit dem Patient verbunden bleiben

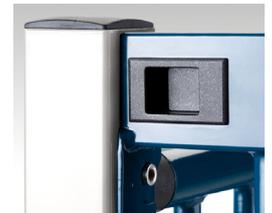

+ Hygiene

Herausnehmbare Liegefläche für optimale Reinigung. Optional waschanlagenfest



+ Zubehör

DIN-Schiene, Infusionshalter, Halter für Zubehör, Schiebegriffe an Kopf- und Fußende, Utensilienkorb und Befestigungsrohre für Infusionspumpen

