

Produktbeschreibung

Stretcher SL gewährleistet **Sicherheit** und **Komfort** für die Patienten und **vereinfacht** dem medizinischen Personal die **Einstellungen** und die **Handhabung**.

Der Patiententransporter verfügt über eine **8 cm dicke Matratze**, die für perfekten Patientenkomfort sorgt. Er ist mit **biocompatiblem, antistatischem PU-Material** bezogen, welches resistent gegenüber Blut, Urin, Fett und Desinfektionsmitteln ist. Die **geschweißten** und **abgeklebten Nähte** tragen in hohem Maße zur Gewährleistung eines **hohen Hygienestandards** bei, da sie das Eindringen von Flüssigkeiten verhindern.

Die hydraulische Höhenverstellung ermöglicht einen großen **Verstellbereich zwischen 57 cm und 104 cm**. Sie ermöglicht eine sehr **niedrige Zugangsposition** für Patienten und eine **angenehme Höhe** für das Personal während des Transports oder der Behandlung.

Der **stabile Unterbau**, geschützt durch die völlig glatte **ABS-Kunststoffabdeckung** und die serienmäßige **Tragfähigkeit von 250 kg**, sorgen für eine perfekte Stabilität der Patiententransportliege.

Die Patientensicherheit wird durch ein Paar **feste und solide Seitengitter (EP-Patent Nr. 3496694)** und die Möglichkeit der Verstellung in **Trendelenburg-Position** im Notfall gewährleistet.

Durch **große antistatische Rollen mit zentralem Blockiersystem**, die es ermöglichen, dass sich die Rollen frei in eine Richtung bewegen oder arretiert werden können, ist die Patiententransportliege leicht entlang der Krankenhausflure zu manövrieren. Sie verfügt über **Schiebegriffe** in zwei verschiedenen Höhen am Kopfteil und zwei zusätzliche Griffe am Beinteil. Um Beschädigungen durch versehentliches Anstoßen zu vermeiden, sind an allen vier Ecken **Wandabweiser** befestigt.



[in](#) [f](#) Bring treatment to a higher level!

Novak M d.o.o.

Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117
F: +386 1 5620118


www.novak-m.com



Notaufnahme






DRAUFSICHT

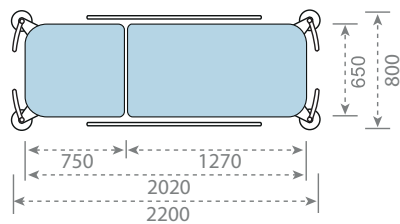


STRETCHER SL

... ein Patiententransporter die sich durch einfaches und funktionales Design auszeichnet.

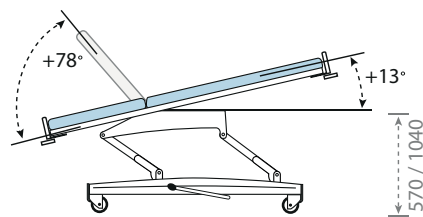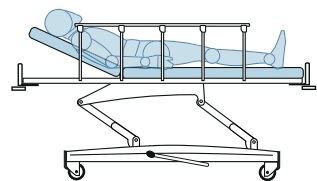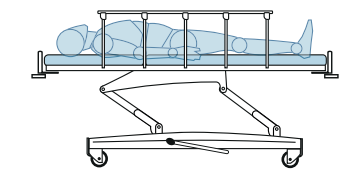

POSITIONEN

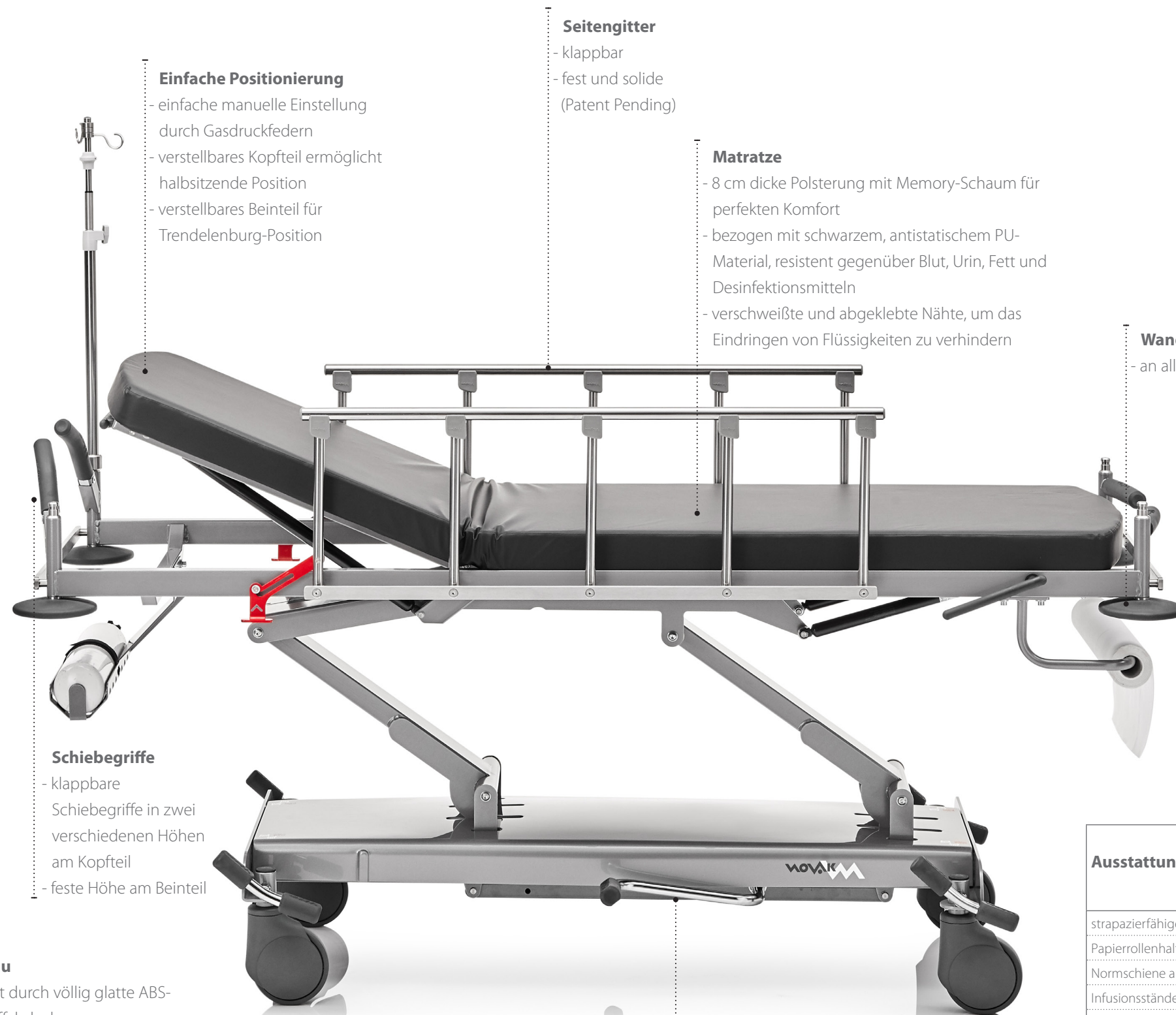

Einfache Positionierung

- einfache manuelle Einstellung durch Gasdruckfedern
- verstellbares Kopfteil ermöglicht halbsitzende Position
- verstellbares Beinteil für Trendelenburg-Position

Seitengitter

- klappbar
- fest und solide (Patent Pending)

Matratze

- 8 cm dicke Polsterung mit Memory-Schaum für perfekten Komfort
- bezogen mit schwarzem, antistatischem PU-Material, resistent gegenüber Blut, Urin, Fett und Desinfektionsmitteln
- verschweißte und abgeklebte Nähte, um das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern

Wandabweiser

- an allen vier Ecken

Schiebegriffe

- klappbare Schiebegriffe in zwei verschiedenen Höhen am Kopfteil
- feste Höhe am Beinteil

Unterbau

- geschützt durch völlig glatte ABS-Kunststoffabdeckung
- serienmäßige Tragfähigkeit von 250 kg
- antistatische Rollen mit zentralem Blockiersystem ermöglichen eine ungehinderte Bewegung der Rollen in eine Richtung oder das Arretieren der Rollen

Höhenverstellung

- hydraulisch durch ein Pedal
- zwischen 57 cm und 104 cm
- sehr niedrige Zugangsposition

Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis

	STRSL-65
strapazierfähige antistatische voll versiegelte Polsterung (8 cm)	●
Papierrollenhalter am Kopfteil – NZP2-SL	○
Normschiene am Liege-, Kopf- oder Fußteil	○
Infusionsständer – SIF-X	○
Sauerstoffflaschenhalterung – O2-S (45 cm)	○
Sauerstoffflaschenhalterung – O2-S-L (55 cm)	○
antistatische Rolle mit zentralem Blockiersystem (Ø 150 mm)	●
standardmäßige 250 kg Tragfähigkeit	●

Serienmäßig ● Option ○