

TBM



U-Shape Röntgenliege

C-Bogen geeignete Röntgenliege für Trauma und Endoskopie mit einer sicheren Arbeitslast von 315 kg




“

Die Röntgenliege U-Shape kann abteilungsübergreifend in Notaufnahme, Radiologie, Endoskopie und zum Patiententransport genutzt werden. Das macht die Arbeit sicher und effizient und Ärzte sowie Pflegepersonal werden entlastet.




+ Funktionalität
Beidseitig abklappbare Seitengitter ermöglichen auf Grund der niedrigen Höhe von 61 cm einen sicheren Ein- und Ausstieg

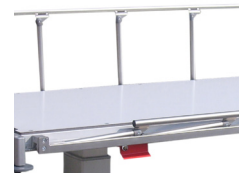

+ Fahrgestell
Das U-förmige Fahrgestell ist leicht zugänglich und bietet optimalen Einsatz für das Röntgen mit dem C-Bogen ohne Patienten umzulagern



+ Flexibilität
Die verstellbare Rückenlehne lässt sich bis zu 70 Grad einstellen und ist 73 cm lang. Die Liege bietet eine sichere Arbeitslast von 315 kg

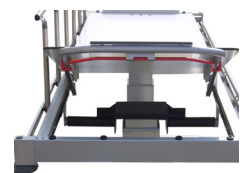

+ Liegefläche
Die zweigeteilte röntgen-durchlässige Liegefläche ist längs zur Kopf- und Fußseite um 21,5 cm verschiebbar



+ Leichtgängig und komfortabel
Die hydraulische Höhenverstellung ist mittels zwei Hubsäulen von 59 cm bis 86 cm verstellbar



+ Sicherheitsbremssystem
An allen Laufrollen befindet sich ein schnell zugängliches Bremssystem, das die Räder blockieren lässt



+ Fahrbarkeit
Die 5. Laufrolle erlaubt müheloses Manövrieren und einfaches Drehen der Liege

