
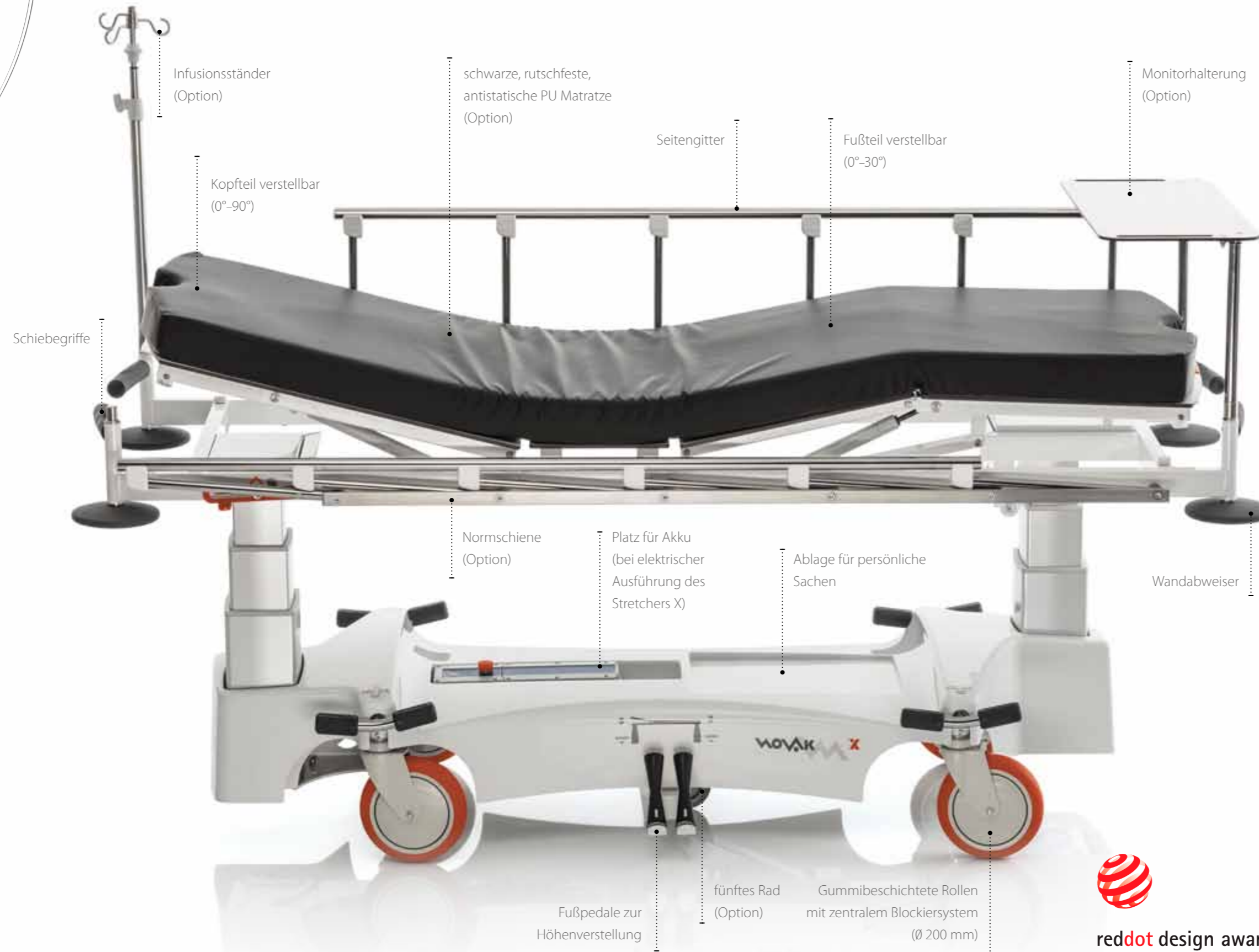
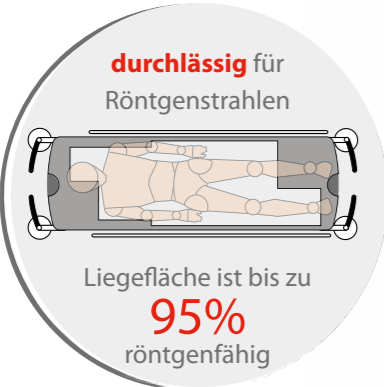
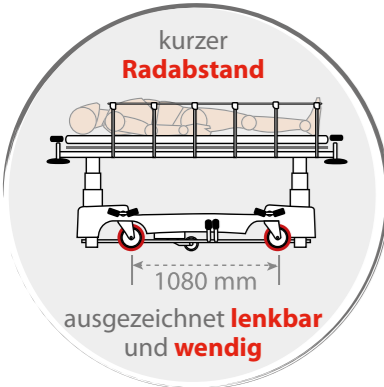


# STRETCHER X

Weil jede Sekunde zählt!

## Modelle

Die Transportliege ist lieferbar mit **ELEKTRISCHEM** oder **HYDRAULISCHEM** Antrieb und mit **2-TEILIGER** oder **4-TEILIGER LIEGEFLÄCHE**.

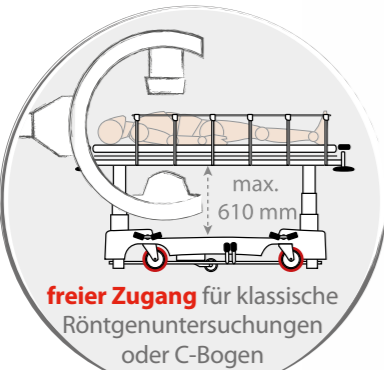

## Optimierter Zugang für Röntgenuntersuchungen

Ein wesentlicher Vorteil des **Stretchers X** liegt in der großen Liegefläche. Diese ist **RÖNTGENFÄHIG** und erlaubt einen optimalen **RÖNTGEN-** oder **C-BOGEN-ZUGANG** von sämtlichen Seiten des Patiententransporters. Dies ermöglicht eine schnellere Versorgung der Notfallpatienten, denn diese müssen während der Untersuchung nicht bewegt werden. Die hervorragende Zugänglichkeit und Röntgentauglichkeit wird durch die **INNOVATIVE DIAGONALFORM DES UNTERBAUS** (Patent Pending), erzielt, welche neue Standards in der Entwicklung von Notfallliegen setzt.

## Ausgezeichnet lenkbar und wendig

Der **KURZE RADABSTAND** vereinfacht das Schieben, Wenden und Ausweichen des Patiententransporters bei Hindernissen. An allen Ecken sind **WANDABWEISER**, die das Fahrwerk und die Umgebung vor Beschädigungen schützen. Die **SCHIEBEGRIFFE** sind ergonomisch geformt, was einen zuverlässigen Griff während der Fahrt ermöglicht. Die **GUMMIBESCHICHTETEN ROLLEN MIT ZENTRALEM BLOCKIERSYSTEM** sind von allen Seiten einstellbar und sorgen für eine maximale Haftung und eine optimale Lenkbarkeit. Das System ermöglicht eine freie Drehbarkeit der Rollen, das Fahren in die gewünschte Richtung oder eine Sperre aller Rollen. Optional kann ein **FÜNFTES RAD** gewählt werden, welches das Lenken des Patiententransporters während der Fortbewegung und des Wendens zusätzlich vereinfacht.

## Einfache Bedienung


Die **UNTERSUCHUNGLIEGE** ist mittels **HYDRAULISCHEN** oder **ELEKTRISCHEN FUßPEDALEN EINFACH HÖHENVERSTELLBAR** und bietet somit auch eine **Trendelenburg und Antitrendelenburg-Lagerung**. Das **KOPFTEIL** ist manuell verstellbar und das Modell mit **4-teiliger Liegefläche** bietet auch synchrones Einstellen der **FUß- UND DER SITZFLÄCHE**. Das stabile **SEITENGITTER** (Patent Pending) aus rostfreiem Metall bietet einen beidseitigen Schutz des Patienten. Mit der **GROßEN AUSWAHL AN ZUBEHÖR**, können Sie den Patiententransporter zusätzlich weiter ausstatten, damit dieser noch besser an Ihre Bedürfnisse angepasst wird.

## Reinigung und Pflege

Die **MATRATZE** ist in drei unterschiedlichen Stärken verfügbar. Zur einfacheren Gewährleistung der entsprechenden Hygiene hergestellt aus antistatischem gegen Blut, Urin, Fette und Desinfektionsmittel beständigem PU-Material. Eine **RUTSCHFESTE MATRATZE** mit rutschfestem Material auf der unteren Seite und zusätzlichen Taschen an den Seiten vermeidet Verrutschen während der Untersuchung und beim Positionieren des Patienten auf dem Patiententransporter. Für Untersuchungen, bei denen Sie den Patienten zusammen mit der Matratze bewegen müssen, können Sie die Option mit **SEITLICHEN GRIFFEN** und **GLATTE UNTERFLÄCHE** wählen. Der **UNTERBAU** ist zum leichteren Reinigen und Instandhalten mit einer Abdeckung aus biegsamem ABS-Kunststoff mit zusätzlicher PMMA-Beschichtung gegen Schrammschäden geschützt.



## Technische Daten

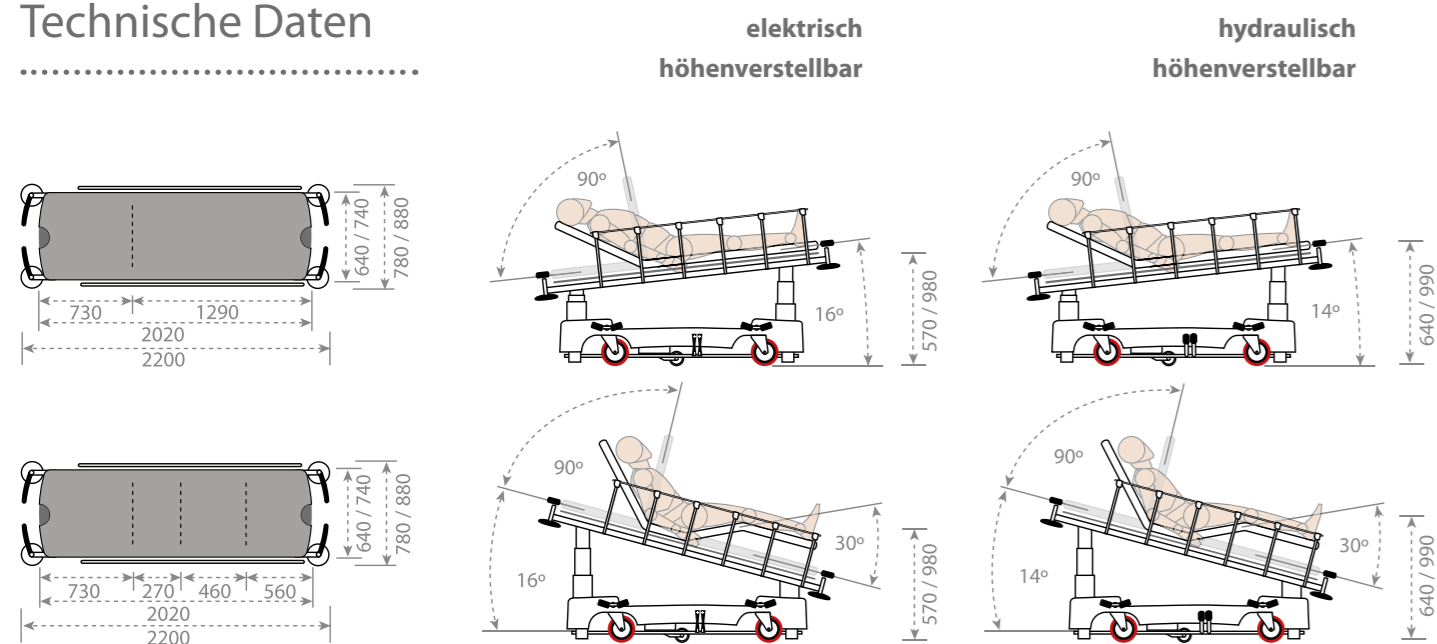

## Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis

	STRX-E	STRX-H
Tragkraft	260 kg	260 kg
Liegehöhe	57–98 cm	64–99 cm
abgesenkte Höhenverstellung (59–89 cm, Trendelenburg 12°) (LH-X)	---	○
rutschfeste Matratze MAT-6/8/10-X (Stärke 6/8/10 cm)	○	○
Matratze mit seitlichen Griffen MAT-6H/8H/10H-X (Stärke 6/8/10 cm)	○	○
Seitengitter	●	●
Wandabweiser	●	●
Schiebegriffe	●	●
Klappbarer Schiebegriffe (FPH-X)	○	○
Papierrollenhalter (NZP-X)	○	○
Infusionsständer (SIF-X)	○	○
Sauerstoffflaschenhalter (Länge 45 cm oder 55 cm) (O2-X, O2-X-L)	○	○
Normschiene an Liege (Paar) (LE-X)	○	○
Normschiene an Kopfteil (LE-X-S)	○	○
Normschiene an Fußteil (LE-X-Z)	○	○
gummibeschichtete Rollen mit zentralem Blockiersystem (Ø 200 mm)	●	●
fünftes Rad (PK-X)	○	○
antistatische Rolle (Stk) (AC-X)	○	○
Monitorhalterung (MH-X)	○	○
Aufladegerät für Batterie (CHR-X)	○	---
zusätzliche Batterie (BAT-X)	○	---

Serienmäßig ● Option ○ Nicht lieferbar ---



Oberschwabenklinik in Ravensburg, Deutschland

## Notaufnahme



reddot design award  
winner 2017