



medifa 4000 GYN

Untersuchungsstühle
für die Gynäkologie



we care.

Perfektion und Ergonomie

Zeitgerechtes und ergonomisches Design

Hochwertige polierte Edelstahlausführung

Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten

Benutzerfreundliches Fußschalter-Bedienkonzept

Zusätzlicher Handschalter mit Farbdisplay (400550/570)

Senioren- und behindertengerechte Aufstiegshöhe

12 Memory-Positionen / 4 Benutzerebenen

Zeitersparnis durch Simultanlauf der Motoren (Memorypositionen)

Umfangreiche Farbgestaltungsmöglichkeiten

Geringe Standfläche durch kompakte Bauweise

Maximal zulässige Gesamtbelastung beträgt 200 kg



Funktionalität und Design



Funktionalität und Design



Elektromotorische Verstellung des
Beinhaltersystems bis 30°



Funktionalität und Design

Elektromotorische Höhenverstellung
von 550 bis 900 mm

Elektromotorische Verstellung der
Rückenlehne bis 50°

Elektromotorische Verstellung des
Beckenteils bis 20°

Modelle

400520

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit elektrischer Höhenverstellung, Beckenhochlagerung und Rückenlehnenverstellung

Abgebildetes Zubehör:

40023

Nackenpolster

81726_1

Komfort-Fußplatten inkl. Kunstlederbezug



Abbildungen mit Zubehör

400550

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit elektrischer Höhenverstellung, Beckenhochlagerung, Rückenlehnenverstellung, Handschalter und Abrufmöglichkeit von jeweils 3 Memorypositionen für 4 Benutzer

Abgebildetes Zubehör:

40023

Nackenpolster

40000

Lackierung des Sockels gemäß RAL-Farbkarte

42000

Säulenverkleidung aus Edelstahl

81717

Beinhalter nach Göpel inkl. Kunstlederbezug



Abbildungen mit Zubehör

Modelle

400570

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit elektrischer Höhenverstellung, Beckenhochlagerung, Rückenlehnenverstellung, Beinhalterverstellung, Handschalter und Abrufmöglichkeit von jeweils 3 Memorypositionen für 4 Benutzer

Abgebildetes Zubehör:

40023

Nackenkissen

81726_2

Fußplatten inkl. Kunstlederbezug



Abbildungen mit Zubehör



	Verstellbereich	400520	400550	400570
Höhenverstellung	550 - 900 mm	●	●	●
Höhenverstellung mit Beckenkipfung	230 mm		550 - 1130 mm	
Beckenhochlagerung	+20°	●	●	●
Rückenlehnenverstellung	+50°	●	●	●
Beinhalterverstellung	30°	■	■	●
Memory (12 Positionen)			●	●
Handschalter		◆	●	●
Maximal zulässige Gesamtbelastung		200 kg	200 kg	200 kg

● Elektrisch ■ Manuell ◆ Optional

Bei den angegebenen Maßen und Gradzahlen handelt es sich um Circa-Angaben. Fertigungsbedingte Abweichungen sind möglich.

Grundausrüstung

- Aluminiumguß-Sockel und Verkleidung der Säule pulverbeschichtet, weiß (RAL 9010)
- Sitzträger und Rückenrahmen aus poliertem Edelstahl
- Elektrische Auslösungen über leicht bedienbaren, separaten Fußschalter
- Elektrische Auslösungen über leicht bedienbaren Handschalter mit Farbdisplay (Modelle 400550, 400570)
- Bodenausgleichsschrauben am Sockel für sichere Aufstellung
- Ergonomisch geformte Polsterteile, Polsterstärke 50 mm
- Kopf- und Rückenpolstersegment vorbereitet zur Aufnahme von Nackenpolster mit Magnetbefestigung
- Polstersegmente mit rückseitiger Kunststoffverkleidung
- Papierrollenhalter zur Aufnahme großer Papierrollen (bis 500 mm) am Rückenteil
- Papier abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur über das Sitzpolster
- Aufnahmevorrichtung für seitliche Führungsschienen (25 x 10 mm) zur Zubehöraufnahme, Haltegriffe sowie Befestigungsvorrichtung für Beinhalter nach Göpel am Beckenteil
- Auffangschale aus weißem Kunststoff, ausziehbar, neigbar, abnehmbar
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Eigengewicht: 110 kg
- Stellfläche: 860 x 550 mm
- Netzanschluss: 110 oder 230 V / 50-60 Hz, inkl. 3 m Anschlusskabel



Bei den angegebenen Maßen und Gradzahlen handelt es sich um Circa-Angaben. Fertigungsbedingte Abweichungen sind möglich.





Komfort und Eleganz

Polsterung

- Ergonomische Ausformung der Polstersegmente
- Abgerundete Ecken und Kanten
- Hochwertiger Kunstlederbezug
- Nahtlose Verarbeitung
- Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
- Umfangreiches Farbspektrum ohne Aufpreis
- Inkl. Magnetbefestigung für Nackenpolster



Technische Informationen

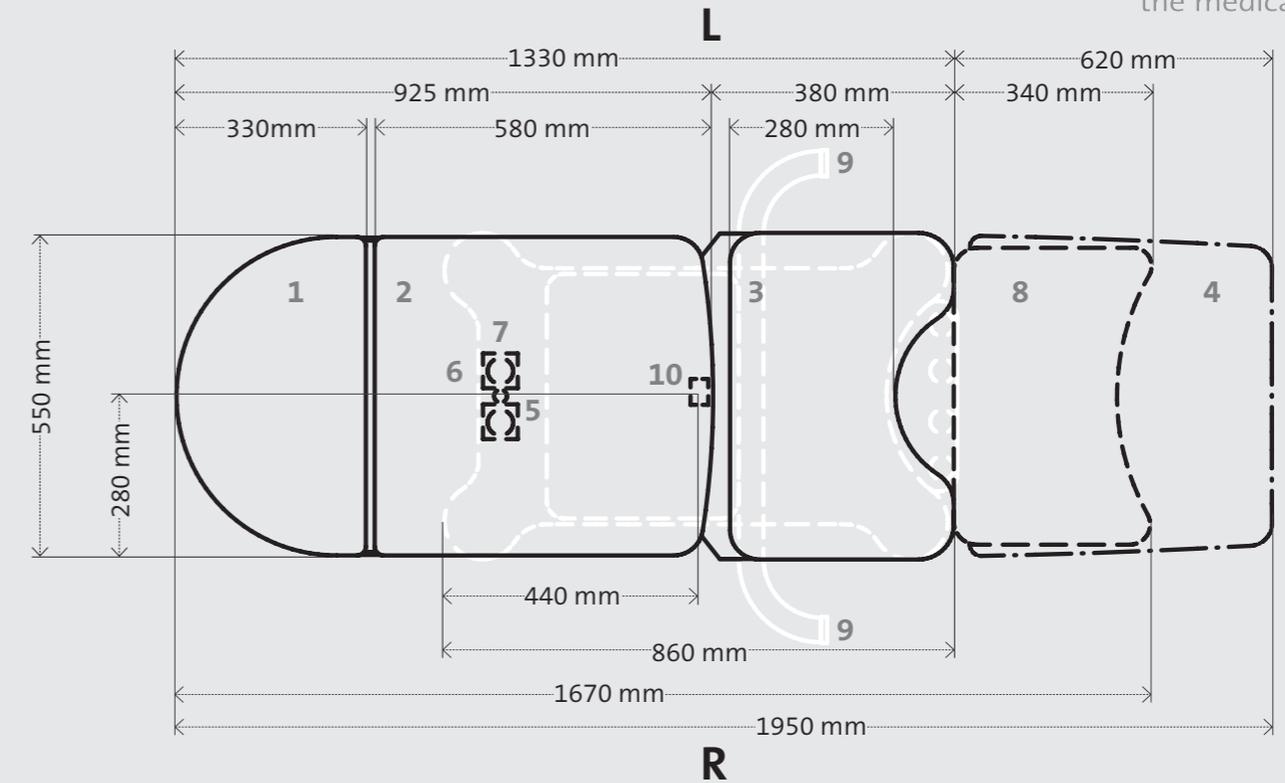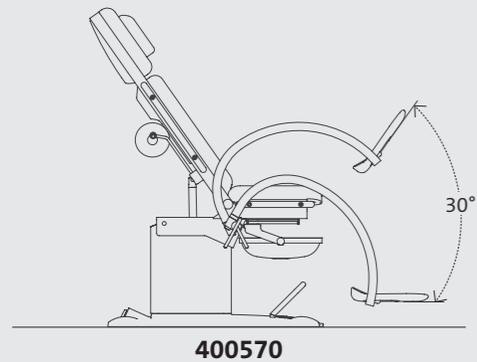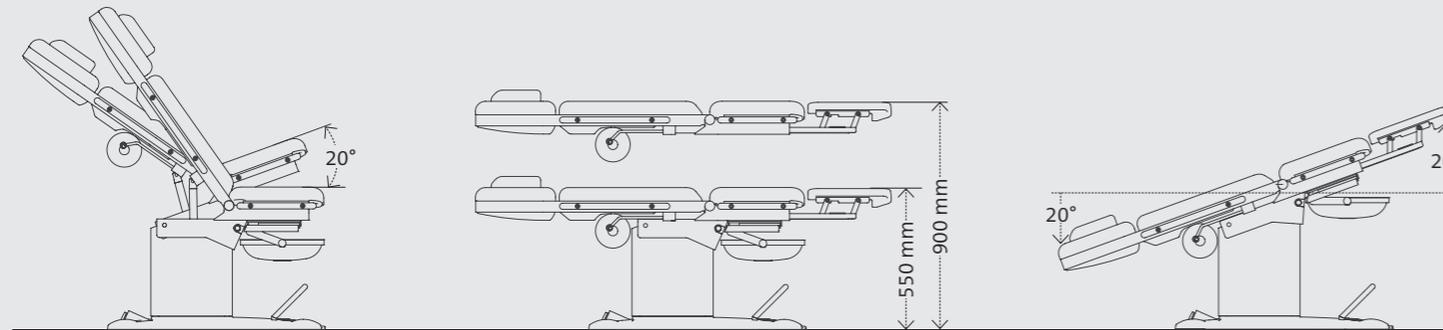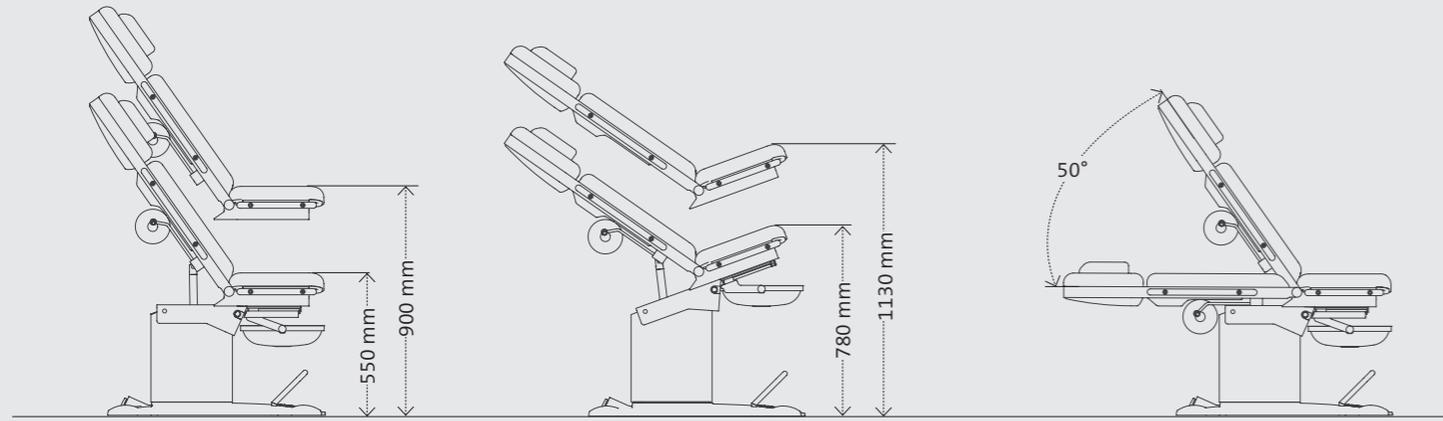

1.	Kopfpolster	6.	Netzkabelausgang
2.	Rückenpolster	7.	Steckdose am Sockel (Zubehör 40677)
3.	Beckenpolster	8.	Beinplatte (Zubehör 400076)
4.	Beinplatte (Zubehör 400066)	9.	Kolposkopaufnahme, rechts oder links (Zubehör 82347_System)
5.	Potentialausgleich (Zubehör 40678)	10.	Kabelaussch für Bodenanschluss

Beinlagerungssysteme



81726_1

Komfort-Fußplatten (Paar) aus Edelstahl, mit Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug, zur Befestigung an den stuhleigenen Verzahnungselementen

- Stufenlose Einhand-Höhenverstellung mit Gasdruckfederunterstützung
- Voreinstellung der Fußplatten über Verzahnung am Stuhl
- Seitlich schwenkbar
- Graue PUR-Fußauflagen



81726_2

Fußplatten (Paar) aus Edelstahl, mit integrierter Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug, zur Befestigung an den stuhleigenen Verzahnungselementen

- Höhenverstellbar
- Seitlich schwenkbar
- Graue PUR-Fußauflagen
- Geeignet für elektrische Verstellung (400570)

Beinlagerungssysteme



81717

Beinhalter nach Göpel aus Edelstahl (Paar), mit Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug, zur Befestigung an den stuhleigenen Verzahnungselementen (nur für Modelle 400520, 400550, 400570)

- Höhenverstellbar
- Seitlich schwenkbar
- Graue PUR-Komfort-Beinschalen
- Stufenlose Einstellung der Beinschalen über Kugelgelenk
- Geeignet für elektrische Verstellung (400570)



81705

Beinhalter nach Göpel Komfort mit grau geschäumten PUR-Beinschalen (Paar)

85223

Seitliche Führungsschienen für das Beckenteil zur Anbringung von Zubehör (Paar), L= 320 mm

81500

Haltekloben aus Edelstahl, drehbar, zur Befestigung an Führungsschiene (Paar)

Beinlagerungssysteme



81700
Beinhalter nach Göpel Klassik, mit schwarz geschäumten PUR-Polstern (Paar)

81710
Aufpreis für Bezug der Beinschalen (nur 81700) mit Kunstlederbezug in Polsterfarbe (Paar)



400066
Beinplatte zur Flachlagerung des Patienten

- Beinplatte adaptierbar über Aufnahmen unter dem Sitzteil
- Erweiterung der Stuhlaufage zu einer Liegefläche bis 1950 mm



400076
Beinplatte zur kurzfristigen Flachlagerung des Patienten

- Beinplatte komplett unter dem Sitzteil einschiebbar
- Erweiterung der Stuhlaufage zu einer Liegefläche bis 1670 mm



40508
Beinhalteraufnahme (weiß, RAL 9010) zur seitlichen Befestigung am Beckenteil (Paar)

Gynäkologisches Zubehör



82347_System

Kolposkophalterung für Systeme Olympus, Kaps, Zeiss, Leisegang, rechts- oder linksseitig

81072

Gyn. Behandlungsset auf Trägerarm, ausziehbar, schwenkbar, rechts- oder linksseitig montierbar, bestehend aus: 1 Instrumentenablateschale, 3 Glaschalen mit Deckel, 3 Glasflaschen mit Deckel, 4 Instrumentenköchern, 1 Objektträger



81051

Edelstahlablage auf Trägerarm, ausziehbar, schwenkbar, rechts- oder linksseitig montierbar
Maße (L x B): 413 x 398 mm

81047_200

Instrumentenabwurf aus Edelstahl zur Befestigung an Stuhlsäule, ausziehbar über Teleskopschiene (Tip-on), mit Edelstahlschale (12.5 Liter) und Edelstahlkorb für Spekula

Maße (Edelstahlschale):
L x B x H = 300 x 235 x 200 mm

Maße (Edelsthalkorb):
L x B x H = 230 x 175 x 140 mm

Allgemeines Zubehör



40677

Steckdose am Sockel, 2 Stück (nicht nachrüstbar)

40678

Potentialausgleichsbuchse am Sockel (nicht nachrüstbar)

40018

Arzt-Fußstütze aus Edelstahl



42000

Säulenverkleidung aus poliertem Edelstahl

40000

Aufpreis für Lackierung des Sockels gem. RAL-Farbkarte

41000

Aufpreis für Lackierung der Säulenverkleidung gem. RAL-Farbkarte

Allgemeines Zubehör



40898
Fahrbarkeit für Untersuchungsstuhl, bestehend aus 4 Doppellenkrollen, $\phi = 75$ mm, feststellbar, elektrisch leitfähig, nicht zum Patiententransport geeignet



40046
Handschalter zur Steuerung der Funktionen Höhenverstellung, Beckenteilverstellung und Rückenlehnenverstellung (nur für Modell 400520, nicht nachrüstbar)




81043
Ablageschale aus Edelstahl, Maße (L x B x H): 325 x 265 x 65 mm



28530
Haltegriffe, weiß RAL 9010 (Paar)

28531
Aufpreis für Bezug der Handgriffe mit Kunstleder in Polsterfarbe (Paar)

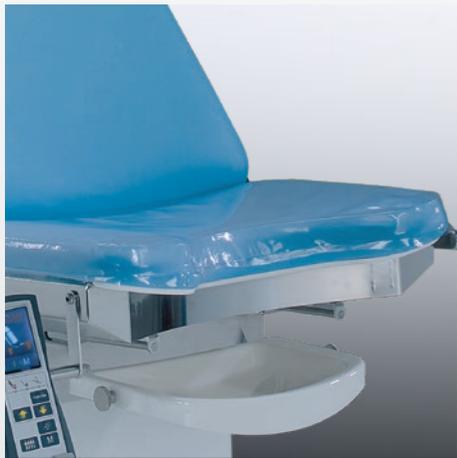

40020
PVC-Schutzbezug für das Beckenteilpolster



85222
Seitliche Führungsschienen für die Rückenlehne zur Anbringung von Zubehör (Paar), L= 600 mm

85223
Seitliche Führungsschienen für das Beckenteil zur Anbringung von Zubehör (Paar), L= 320 mm



61211
Armauflage, dreh- und kippbar über Kugelgelenk, höhenverstellbar, horizontal verschiebbar, Polster elektrisch leitfähig, inkl. Befestigungskloben und Befestigungsgurt, Maße (Polster): L x B x H = 400 x 115 x 40 mm



40220
Armauflage, schwenkbar, inkl. Polster in Stuhlfarbe, mit Befestigung, Maße (Polster): L x B = 600 x 165 mm

Allgemeines Zubehör



40023
Nackenkissen inkl. Magnet-
befestigung



81805
Infusionsstange zur Befestigung an
einer Führungsschiene, Edelstahl, inkl.
Kloben (drehbar)



40070
Wandhalterung aus Edelstahl
zur Aufnahme von Fußstützen,
Beinhaltern, Beinplatten und anderen
Zubehören zur Befestigung an
Führungsschiene (25 x 10 mm),
Maße (L x B x H): 220 x 600 x 50 mm



82348
Untersuchungsleuchte zur
Anbringung an Halterung 82349_1,
82349_2 oder 82349_3

- LED-Technologie (40'000 lx / 0.5 m)
- Lichtfeld 180 mm
- Präzise Farbwiedergabe Ra >93
- Lichtfarben 3300 K, 3800 K oder 4400 K
- Beleuchtungsstärke 5-stufig dimmbar
- Bedieneinheit am Leuchtenkopf
- Stufenloses Positionieren durch flexiblen Arm
- Geringe Wärmestrahlung im Licht



82349_1
Halterung für Untersuchungsleuchte,
rechtsseitig

82349_2
Halterung für Untersuchungsleuchte,
linksseitig

82349_3
Leuchtenhalterung für Untersuchungs-
stuhl mit Kolposkophalterung, rechts
oder linksseitig

Beistellmobiliar

Unser Gesamtprogramm:



366036

Untersuchungshocker mit Rundsitz, poliertem Edelstahl-Fuß, Doppellenkrollen \varnothing 65 mm (elektr. leitfähig), Zentralbremse über Fußauslösung, höhenverstellbar per Gasdruckfeder mit Fußauslösung von 480 - 605 mm,

Maße:

Sitzfläche \varnothing = 400 mm,
Polsterstärke = 70 mm,
Stellfläche \varnothing = 600 mm



206045

Rollhocker mit Sattelsitz, Aluminium-Fußkreuz, Doppellenkrollen \varnothing 65mm (elektr. leitfähig), höhenverstellbar per Gasdruckfeder 450 - 580 mm, mit Hebeauslösung unter dem Sitzpolster, inkl. Fußring,

Maße:

Sattelsitz \varnothing = 400 mm,
Polsterstärke = 70 mm,
Stellfläche \varnothing = 600 mm

Mobile Operationstische und OP-Tisch-Zubehör

medifa 8000
medifa 7000
medifa 6000
medifa 5000
medifa 5000 Basic
Zubehör für OP-Tische



Untersuchungs- und Behandlungsstühle

medifa 4000 GYN
medifa 4000 URO



Medizinisches Funktionsmobiliar und Multifunktionsstühle

medifa 3000
medifa 2000



medifa
the medical factory



we care.

CE

Version 0001-18-DE
Änderungen vorbehalten.

www.medifa.com | a company of the medifa healthcare group

medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5

57413 Finnentrop

Germany

fon +49 2721 71 77 -0

fax +49 2721 71 77 -15

info@medifa.com

Made in Germany

