



medifa 4000 URO

Untersuchungsstühle
für die Urologie



we care.

Perfektion und Ergonomie

Zeitgerechtes und ergonomisches Design

Hochwertige polierte Edelstahlausführung

Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten

Benutzerfreundliches Fußschalter-Bedienkonzept

Zusätzlicher Handschalter mit Farbdisplay (400550/570)

Senioren- und behindertengerechte Aufstiegshöhe

12 Memory-Positionen / 4 Benutzerebenen

Zeitersparnis durch Simultanlauf der Motoren (Memorypositionen)

Umfangreiche Farbgestaltungsmöglichkeiten

Geringe Standfläche durch kompakte Bauweise

Maximal zulässige Gesamtbelastung beträgt 200 kg



Funktionalität und Design



Funktionalität und Design



Elektromotorische Verstellung des
Beinhaltersystems bis 30°



Funktionalität und Design

Elektromotorische Höhenverstellung
von 550 bis 900 mm

Elektromotorische Verstellung der
Rückenlehne bis 50°

Elektromotorische Verstellung des
Beckenteils bis 20°

Modelle

400520

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit elektrischer Höhenverstellung, Beckenhochlagerung und Rückenlehnenverstellung

Abgebildetes Zubehör:

40023

Nackenkissen

81726_1

Komfort-Fußplatten

91706

Kreiselpülung mit Wasserzulauf und -ablauf



Abbildungen mit Zubehör

400550

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit elektrischer Höhenverstellung, Beckenhochlagerung, Rückenlehnenverstellung, Handschalter und Abrufmöglichkeit von jeweils 3 Memorypositionen für 4 Benutzer

Abgebildetes Zubehör:

40023

Nackenkissen

40000

Lackierung des Sockels gemäß RAL-Farbkarte

42000

Säulenverkleidung aus Edelstahl

81717

Beinhalter nach Göpel inkl. Kunstlederbezug

91706

Kreiselpülung mit Wasserzulauf und -ablauf



Abbildungen mit Zubehör

Modelle

400570

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit elektrischer Höhenverstellung, Beckenhochlagerung, Rückenlehnenverstellung, Beinhalterverstellung, Handschalter und Abrufmöglichkeit von jeweils 3 Memorypositionen für 4 Benutzer

Abgebildetes Zubehör:

40023

Nackenkissen

81726_2

Fußplatten inkl. Kunstlederbezug

91706

Kreiselspülung mit Wasserzulauf und -ablauf



Abbildungen mit Zubehör



| | Verstellbereich | 400520 | 400550 | 400570 |
|------------------------------------|-----------------|--------|--------------|--------|
| Höhenverstellung | 550-900 mm | ● | ● | ● |
| Höhenverstellung mit Beckenkipfung | 230 mm | | 550 -1130 mm | |
| Beckenhochlagerung | +20° | ● | ● | ● |
| Rückenlehnenverstellung | +50° | ● | ● | ● |
| Beinhalterverstellung | 30° | ■ | ■ | ● |
| Memory (12 Positionen) | | | ● | ● |
| Handschalter | | ◆ | ● | ● |
| Wasserspülung | | ◆ | ◆ | ◆ |
| Maximal zulässige Gesamtbelastung | | 200 kg | 200 kg | 200 kg |

● Elektrisch ■ Manuell ◆ Optional

Bei den angegebenen Maßen und Gradzahlen handelt es sich um Circa-Angaben. Fertigungsbedingte Abweichungen sind möglich.

Grundausrüstung

- Aluminiumguß-Sockel und Verkleidung der Säule pulverbeschichtet, weiß (RAL 9010)
- Sitzträger und Rückenrahmen aus poliertem Edelstahl
- Elektrische Auslösungen über leicht bedienbaren, separaten Fußschalter
- Elektrische Auslösungen über leicht bedienbaren Handschalter mit Farbdisplay (Modelle 400550, 400570)
- Bodenausgleichsschrauben am Sockel für sichere Aufstellung
- Ergonomisch geformte Polsterteile, Polsterstärke 50 mm
- Kopf- und Rückenpolstersegment vorbereitet zur Aufnahme von Nackenpolster mit Magnetbefestigung
- Polstersegmente mit rückseitiger Kunststoffverkleidung
- Papierrollenhalter zur Aufnahme großer Papierrollen (bis 500 mm) am Rückenteil
- Papier abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur über das Sitzpolster
- Aufnahmevorrichtung für seitliche Führungsschienen (25 x 10 mm) zur Zubehöraufnahme, Haltegriffe sowie Befestigungsvorrichtung für Beinhalter nach Göpel am Beckenteil
- Auffangschale aus weißem Kunststoff, ausziehbar, neigbar, abnehmbar
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Eigengewicht: 110 kg
- Stellfläche: 860 x 550 mm
- Netzanschluss: 110 oder 230 V / 50-60 Hz, inkl. 3 m Anschlusskabel



Bei den angegebenen Maßen und Gradzahlen handelt es sich um Circa-Angaben. Fertigungsbedingte Abweichungen sind möglich.

Komfort und Eleganz

Polsterung

- Ergonomische Ausformung der Polstersegmente
- Abgerundete Ecken und Kanten
- Hochwertiger Kunstlederbezug
- Nahtlose Verarbeitung
- Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
- Umfangreiches Farbspektrum ohne Aufpreis
- Inkl. Magnetbefestigung für Nackenpolster



Beinlagerungssysteme



81726_1

Komfort-Fußplatten (Paar) aus Edelstahl, mit Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug, zur Befestigung an den stuhleigenen Verzahnungselementen (nur für Modelle 400520, 400550, 400570)

- Stufenlose Einhand-Höhenverstellung mit Gasdruckfederunterstützung
- Voreinstellung der Fußplatten über Verzahnung am Stuhl
- Seitlich schwenkbar
- Graue PUR-Fußauflagen



81717

Beinhalter nach Göpel aus Edelstahl (Paar), mit Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug, zur Befestigung an den stuhleigenen Verzahnungselementen (nur für Modelle 400520, 400550, 400570)

- Höhenverstellbar
- Seitlich schwenkbar
- Graue PUR-Komfort-Beinschalen
- Stufenlose Einstellung der Beinschalen über Kugelgelenk
- Geeignet für elektrische Verstellung (400570)



81726_2

Fußplatten (Paar) aus Edelstahl, mit integrierter Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug, zur Befestigung an den stuhleigenen Verzahnungselementen (nur für Modelle 400520, 400550, 400570)

- Höhenverstellbar
- Seitlich schwenkbar
- Graue PUR-Fußauflagen
- Geeignet für elektrische Verstellung (400570)



81705

Beinhalter nach Göpel Komfort mit grau geschäumten PUR-Beinschalen (Paar)

85223

Seitliche Führungsschienen für das Beckenteil zur Anbringung von Zubehör (Paar), L= 320 mm

81500

Haltekloben aus Edelstahl, drehbar, zur Befestigung an Führungsschiene (Paar)

Beinlagerungssysteme



81700
Beinhalter nach Göpel Klassik, mit schwarz geschäumten PUR-Polstern (Paar)

81710
Aufpreis für Bezug der Beinschalen (nur 81700) mit Kunstlederbezug in Polsterfarbe (Paar)



400066
Beinplatte zur Flachlagerung des Patienten

- Beinplatte adaptierbar über Aufnahmen unter dem Sitzteil
- Erweiterung der Stuhlauflage zu einer Liegefläche bis 1950 mm



400076
Beinplatte zur kurzfristigen Flachlagerung des Patienten

- Beinplatte komplett unter dem Sitzteil einschiebbar
- Erweiterung der Stuhlauflage zu einer Liegefläche bis 1670 mm



40508
Beinhalteraufnahme (weiß, RAL 9010) zur seitlichen Befestigung am Beckenteil (Paar)

Urologisches Zubehör



91706
Kreiselspülung (ø 320mm) aus Edelstahl. mit Zu- und Ablauf, Wasserzulauf elektromagnetisch über Fußschalter zu bedienen



91707
Auffangsieb zum Einlegen in die Wasserspülschale

91716
Seitliches Einhängegerüst für Wasserspülschale oder Uroflow-System



91760
Halterung für Urodynamik-Patienteneinheit, Albyn Medical „Smartdyn“, zur Befestigung an einer Führungsschiene



91762
Halterung für Uroflow-System, inkl. Aufhängung am Stuhl

91763
Wie 91762, jedoch in Kombination mit Wasserspülschale Art.-Nr.: 91706




91617
Nirostaschale (ø 320 mm), mit Abfluß und Schlauch




91608
Eimer aus Edelstahl. 18/8, Volumen 12 Liter, einschl. Deckel

91766
Einsteckpolster zur Sitzteilverlängerung für Urodynamik, Maße: (L x B) 170 x 150 mm

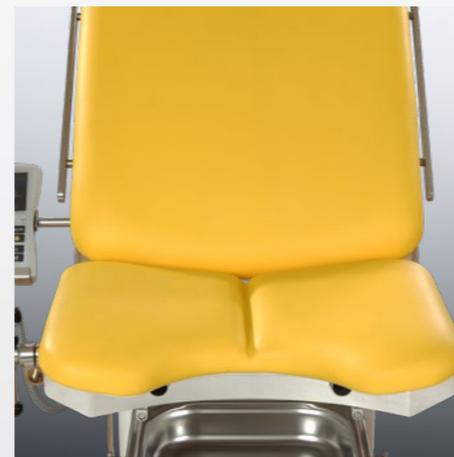

91765
Urodynamik-Sitzpolster mit zentraler Ablaufrinne

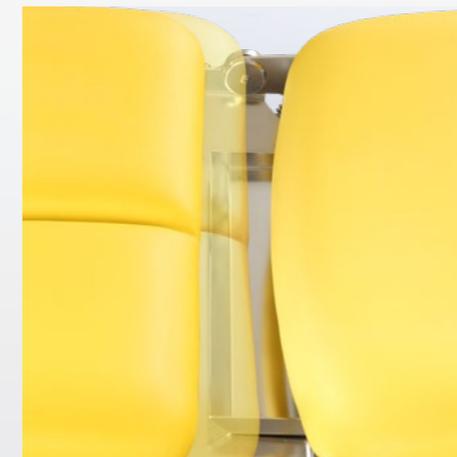

91767
Ablaufwanne aus Edelstahl mit Ablaufschlauch

Allgemeines Zubehör



40677
Steckdose am Sockel, 2 Stück (nicht nachrüstbar)



40678
Potentialausgleichsbuchse am Sockel (nicht nachrüstbar)

40018
Arzt-Fußstütze aus Edelstahl



40898
Fahrbarkeit für Untersuchungsstuhl, bestehend aus 4 Doppellenkrollen, $\varnothing = 75 \text{ mm}$, feststellbar, elektrisch leitfähig, nicht zum Patiententransport geeignet

40046
Handschalter zur Steuerung der Funktionen Höhenverstellung, Beckenteilverstellung und Rückenlehnenverstellung (nur für Modell 400520, nicht nachrüstbar)




42000
Säulenverkleidung aus poliertem Edelstahl



40000
Aufpreis für Lackierung des Sockels gem. RAL-Farbkarte

41000
Aufpreis für Lackierung der Säulenverkleidung gem. RAL-Farbkarte

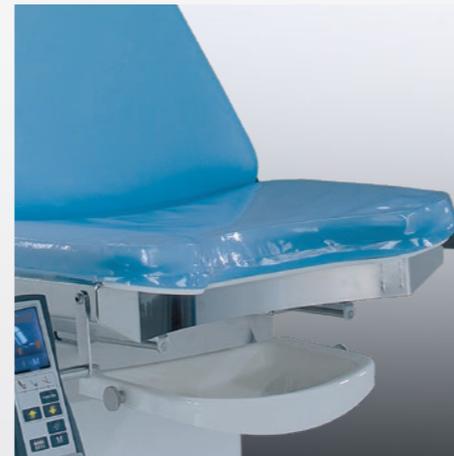

40020
PVC-Schutzbezug für das Beckenteilpolster

85222
Seitliche Führungsschienen für die Rückenlehne zur Anbringung von Zubehör (Paar), L= 600 mm

85223
Seitliche Führungsschienen für das Beckenteil zur Anbringung von Zubehör (Paar), L= 320 mm

Allgemeines Zubehör



81043
Ablageschale aus Edelstahl,
Maße (L x B x H): 325 x 265 x 65 mm



28530
Haltegriffe, weiß RAL 9010 (Paar)

28531
Aufpreis für Bezug der Handgriffe mit
Kunstleder in Polsterfarbe (Paar)



40023
Nackenkissen inkl. Magnet-
befestigung



81805
Infusionsstange zur Befestigung an
einer Führungsschiene, Edelstahl, inkl.
Kloben (drehbar)



61211
Armauflage, dreh- und kippbar über
Kugelgelenk, höhenverstellbar, hori-
zontal verschiebbar, Polster elektrisch
leitfähig, inkl. Befestigungskloben und
Befestigungsgurt, Maße (Polster):
L x B x H = 400 x 115 x 40 mm



40220
Armauflage, schwenkbar, inkl. Polster
in Stuhlfarbe, mit Befestigung, Maße
(Polster): L x B = 600 x 165 mm



40070
Wandhalterung aus Edelstahl
zur Aufnahme von Fußstützen,
Beinhaltern, Beinplatten und anderen
Zubehören zur Befestigung an
Führungsschiene (25 x 10 mm),
Maße (L x B x H): 220 x 600 x 50 mm



Allgemeines Zubehör



82348

Untersuchungsleuchte zur Anbringung an Halterung 82349_1, 82349_2 oder 82349_3

- LED-Technologie (40'000 lx / 0.5 m)
- Lichtfeld 180 mm
- Präzise Farbwiedergabe Ra >93
- Lichtfarben 3300 K, 3800 K oder 4400 K
- Beleuchtungsstärke 5-stufig dimmbar
- Bedieneinheit am Leuchtenkopf
- Stufenloses Positionieren durch flexiblen Arm
- Geringe Wärmestrahlung im Licht



82349_1

Halterung für Untersuchungsleuchte, rechtsseitig

82349_2

Halterung für Untersuchungsleuchte, linksseitig

82349_3

Leuchtenhalterung für Untersuchungsstuhl mit Kolposkophalterung, rechts oder linksseitig

Beistellmobiliar



366036

Untersuchungshocker mit Rundsitz, poliertem Edelstahl-Fuß, Doppellenkrollen \varnothing 65 mm (elektr. leitfähig), Zentralbremse über Fußauslösung, höhenverstellbar per Gasdruckfeder mit Fußauslösung von 480 - 605 mm,

Maße:

Sitzfläche \varnothing = 400 mm,
Polsterstärke = 70 mm,
Stellfläche \varnothing = 600 mm

Beistellmobiliar

Unser Gesamtprogramm:



206045

Rollhocker mit Sattelsitz, Aluminium-Fußkreuz, Doppellenkrollen \varnothing 65mm (elektr. leitfähig), höhenverstellbar per Gasdruckfeder 450 - 580 mm, mit Hebeauslösung unter dem Sitzpolster, inkl.

Fußring,

Maße:

Sattelsitz \varnothing = 400 mm,

Polsterstärke = 70 mm,

Stellfläche \varnothing = 600 mm

Mobile Operationstische und OP-Tisch-Zubehör

medifa 8000

medifa 7000

medifa 6000

medifa 5000

medifa 5000 Basic

Zubehör für OP-Tische

Untersuchungs- und Behandlungsstühle


medifa 4000 GYN

medifa 4000 URO

Medizinisches Funktionsmobiliar und Multifunktions-tische

medifa 3000

medifa 2000

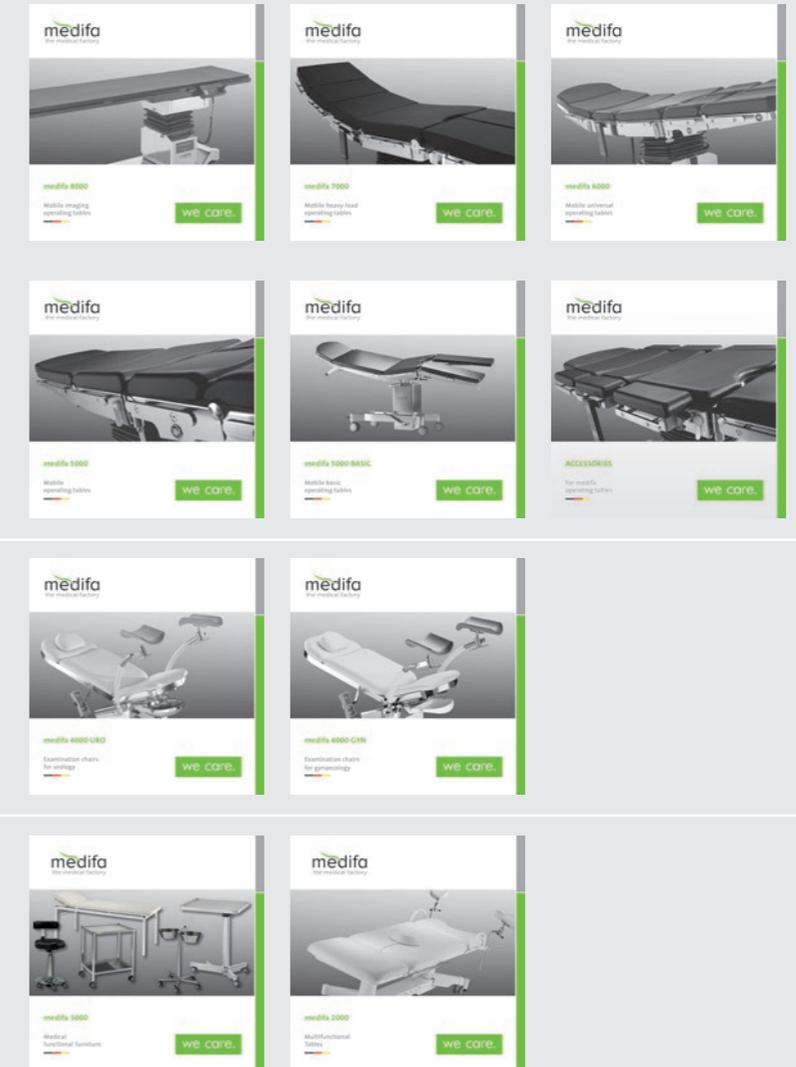

medifa
the medical factory



we care.

CE

Version 0001-18-DE
Änderungen vorbehalten.

www.medifa.com | a company of the medifa healthcare group

medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5

57413 Finnentrop

Germany

fon +49 2721 71 77 -0

fax +49 2721 71 77 -15

info@medifa.com

Made in Germany

