



medifa 5000 BASIC

Mobile
Basis-OP-Tische



we care.

Perfektion und Ergonomie

Zeitgerechtes und ergonomisches Design

Hochwertige polierte Edelstahlausführung (ChrNiSt, 1.4301)

Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten

Einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis

Einfache Bedienung und Wartung

Für Röntgen- und C-Bogen-Einsatz geeignet

Ergonomisch geformte, abnehmbare Polsterauflagen

Optimale Fußfreiheit und Standfestigkeit durch Y-Fuß-Konstruktion

Vielfältige Einsatz- und Lagerungsmöglichkeiten



Ambulanz- und Feld-OP-Tisch



Abbildungen mit Zubehör



Abbildungen mit Zubehör

Notfalltransporter



Abbildungen mit Zubehör

Modelle



501010

- Höhenverstellung mittels Fußpumpenhydraulik von 740 bis 990 mm
- Trendelenburgverstellung, gasdruckfederunterstützt, von -30° bis +30°
- Lateralverstellung, gasdruckfederunterstützt, bis 18°
- Rückenlehnenverstellung, gasdruckfederunterstützt, von -40° bis +75°
- Möglichkeit zur Einstellung der Flex-/ Reflexposition
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Seitl. Schienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
- Fahrbarkeit über 4 Doppelrollen ø 100 mm, 2 feststellbar, 2 richtungsstabil
- Eigengewicht: 120 kg
- Stellfläche: (L x B) 910 x 510 mm

medifa
the medical factory



501020

Wie 501010, jedoch mit elektrischer Höhenverstellung von 750 bis 1000 mm mittels Handschalter





Abbildungen mit Zubehör

Technische Informationen









	Verstellbereich	501010	501020
Höhenverstellung	740 - 990 mm	●	
Höhenverstellung	750 - 1000 mm		◆
Trendelenburg	-30° / +30°	■	■
Lateralverstellung	-20° / +20°	■	■
Rückenteilverstellung	-40° / +75°	■	■
Flexbewegung		■	■
Maximal zulässige Gesamtbelastung		150 kg	150 kg

● Fußpumpenhydraulik ■ Gasdruckfederunterstützt ◆ Elektrisch

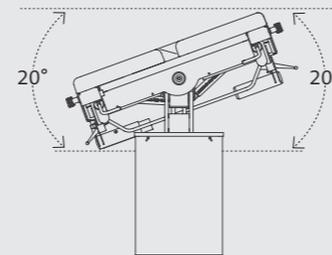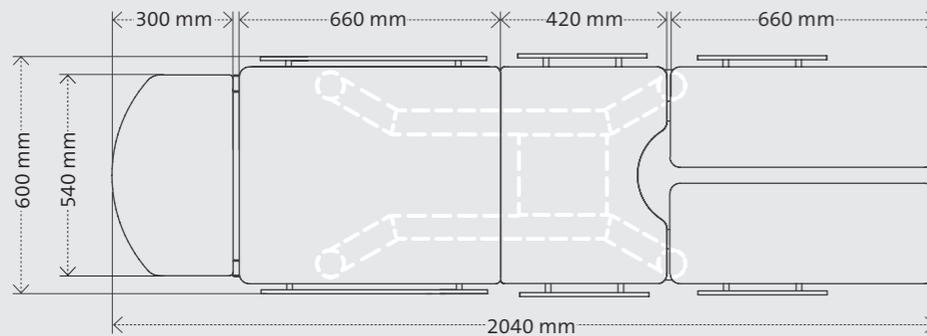

A: 501010 / B: 501020

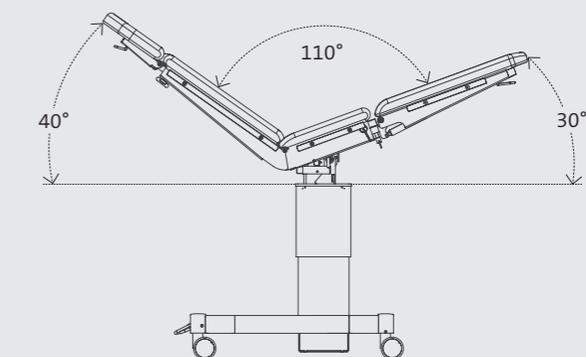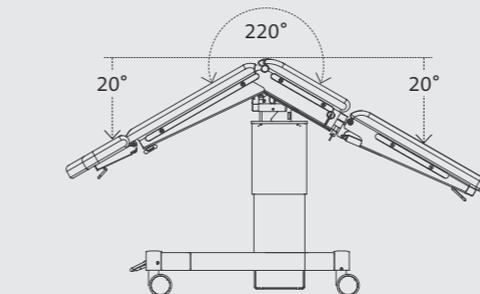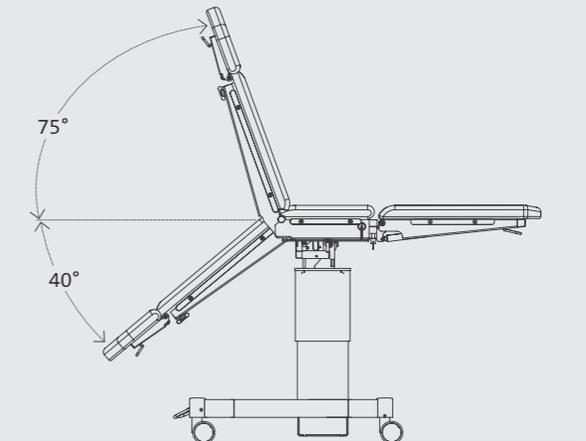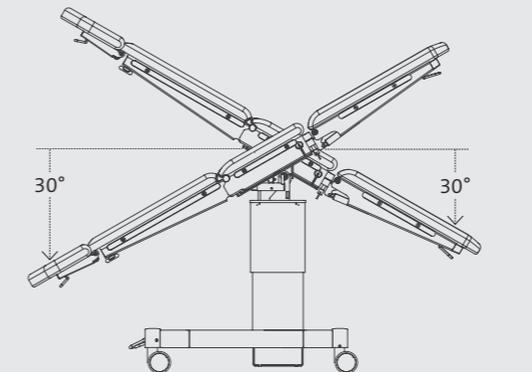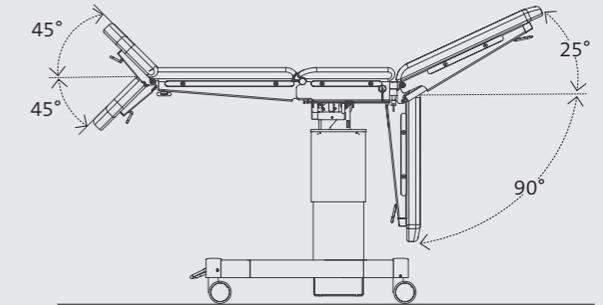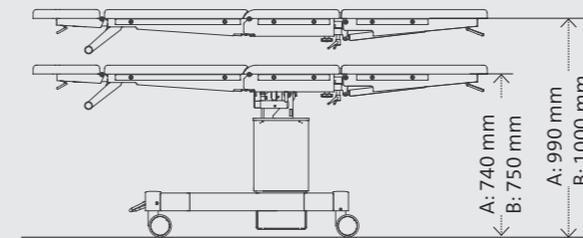

Ergänzendes Zubehör

Eine Vielzahl an Anbauzubehören ergänzt die disziplinären Anwendungsmöglichkeiten der Operationstische.

Zur zentralen Lagerung des Zubehörs, dient ein Zubehörwagen (Art.-Nr. 341045) aus Chromnickelstahl. Dieser verfügt über fünf Einschübe zur Aufnahme von Polster-elementen, fünf Führungsschienen (25 x 10 mm) zur Lagerung von weiteren Anbauteilen sowie einem Ablagefach für Kleinstgegenstände.



Unser Gesamtprogramm:

Mobile Operationstische und OP-Tisch-Zubehör


medifa 8000
medifa 7000
medifa 6000
medifa 5000
medifa 5000 Basic
Zubehör für OP-Tische

Untersuchungs- und Behandlungsstühle

medifa 4000 GYN
medifa 4000 URO

Medizinisches Funktionsmobiliar und Multifunktions-tische

medifa 3000
medifa 2000

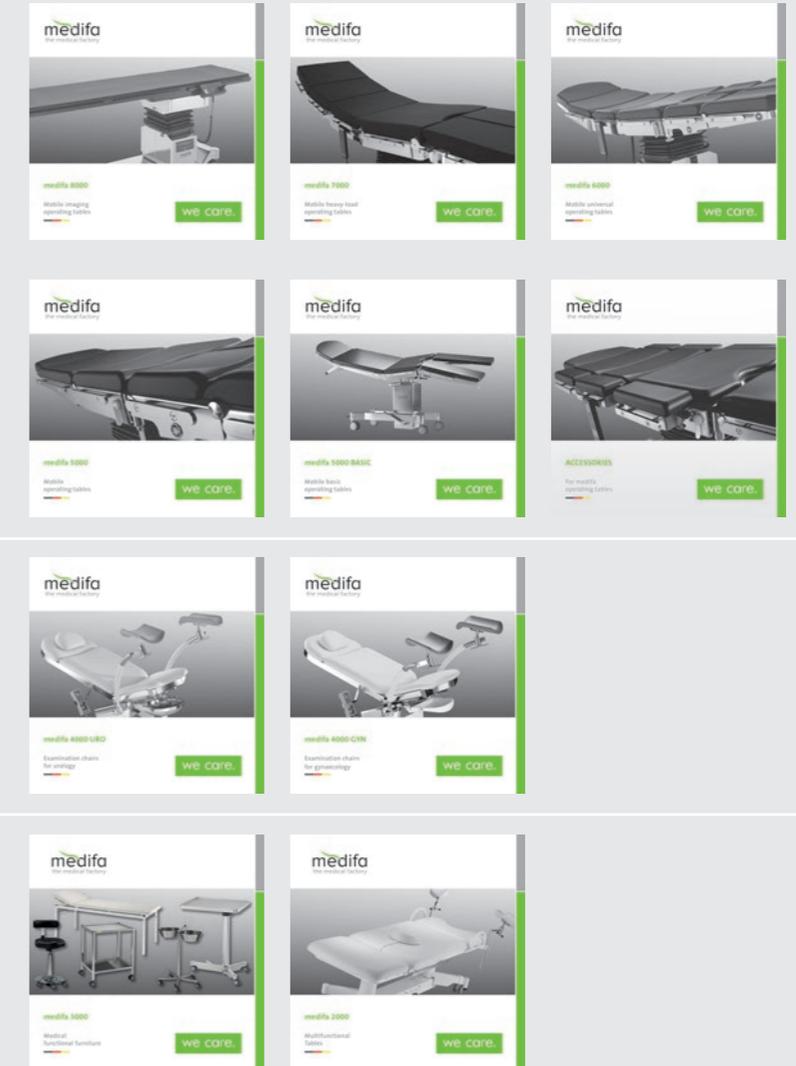

medifa
the medical factory



we care.

CE

Version 0001-18-DE
Änderungen vorbehalten.

www.medifa.com | a company of the medifa healthcare group

medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5

57413 Finnentrop

Germany

fon +49 2721 71 77 -0

fax +49 2721 71 77 -15

info@medifa.com

Made in Germany

