



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 10.07.2025





Erstelldatum 10.07.2025, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



HESS RÖNTGENLIEGE / C-BOGENLIEGE SWISSTROLL® X, ELEKTRISCH

Unverwüstliche Röntgenliege / C-Bogenliege mit dem klugen Plus an Funktionalität

Art-Nr: H06-603



TECHNISCHE DATEN

Höhenverstellbereich
60 - 100 cm

Verstellbereich Rückenteil
0 - 70 °

Liegefläche
205 x 73 cm

Doppellenkrollen
Ø 125 mm

Max. Patientengewicht
250 kg

Röntgenfenster
60 x 165 cm

Gesamtmasse
234 x 90 cm

Geräteschiene
25 x 10 mm

Medizinprodukt
Class I

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 10.07.2025, Änderungen und Fehler vorbehalten

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Röntgenliege / C-Bogenliege Swisstroll® X ist ein echter Allrounder und modular aufgebaut. Wählen Sie zwischen elektrischem oder hydraulischem Antriebssystem und ob die Liege mit einem Seitengitter und Geräteschiene ausgerüstet sein soll. Die solide und hochwertige U-Basis (U-Shape) in Verbindung mit der elektrischen Höhenverstellung, macht den Zugang mit dem C-Bogen besonders einfach. Aufgrund des grossen Röntgenfensters muss der Patient nicht mehr umpositioniert werden. Die elektrische Höhen-, Trendelen- und Antitrendelenburgverstellung erfolgt mittels

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Rollentyp**
Kunststoff, rostfrei mit Fadenschutzelektrisch leitend
- **Fahrwerk**
mit Richtungsfeststeller und Zentral-Total-Blockierung
- **Ausführung**
schneller und leiser Antrieb mit Softstart, höchster Komfort für die Patienten
- **Liegefläche**
röntgendurchlässig mehrteilig
- **Rückenteil**
leichtgängig verstellbar mittels Gasfederunterstützung
- **Trend-/Antitrendelenburg**
optional
- **Höhenverstellung**
elektrisch höhenverstellbar ohne seitlichen Versatz mittels Handschalter oder Fusstasten, optional zu wählen
- **Seitengitter**
optional
- **Konstruktion**
U-förmige Basis für einfachen Zugang mit einem C-Bogen
- **Wandabweiser**
Wandabweiser und Einstecklöcher für Zubehör an allen 4 Ecken
- **Kompatibilität**
nur bedingt kompatibel mit konventionellem Röntgen
- **SWISS MADE**



Handschalter. Optional kann die C-Bogenliege mit bis zu drei Fussaltern ausgestattet werden. Die neuste Antriebstechnologie mit Softstart für eine ruckfreie Höhenverstellung steigert das Wohlbefinden Ihres Patienten - Die elektrische Verstellung erfolgt absolut ruckfrei und schnell. Die Röntgenliege ist optional mit einem Rückenteil an Kopf und Fussende erhältlich, so müssen Sie sich bei der Platzierung des Patienten keine Gedanken machen wo hinten und vorne ist. Standardmässige Wandabweisen schützen nicht nur die Röntgenliege, sondern auch andere Infrastrukturen. Die C-Bogenliege verfügt über ein optionales Fahrwerk mit Zentral-Total-Blockierung, die Bedienung ist von allen Seiten uneingeschränkt gewährleistet. Ohne die Option «Fünftes Rad /5. Wheel», wird die Liege mit einem richtungsfeststellenden Rad geliefert. Die hochwertigen und grossen Doppelenkrollen machen die Liege nicht nur zu einer Röntgenliege, sondern auch zu einem Notfallstretcher. An allen 4 Ecken der Liege kann zum Beispiel ein Infusionsständer oder ein Monitorhalter angebracht werden. Mit der Option «Akku», ist es möglich den Stretcher vollkommen autark zu betreiben. Überzeugen Sie sich von dieser hochwertigen und multifunktionellen Liege!

ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS

- **Rahmenfarbe**

RAL 9016 verkehrsweiss



Erstelldatum 10.07.2025, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



HESS RÖNTGENLIEGE / C-BOGENLIEGE SWISSTROLL® X, ELEKTRISCH

Unverwüstliche Röntgenliege / C-Bogenliege mit dem klugen Plus an Funktionalität

Art-Nr: H06-603

VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Röntgentisch SwissTroll® X One

H06-611-SET1



Röntgenliege / C-Bogenliege SwissTroll® X «pump», hydraulisch

H06-607



Hygienesäule mit Desinfektionsmittelspender H.U.G.O.

H06-611

ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop




SwissTroll Comfort-Matratze PU-Bezug elektrisch leitend

H06-558.040




SwissTroll Comfort-Matratze Kunstleder-Bezug elektrisch leitend

H06-558.039

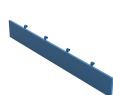

Polster für Seitengitter

H06-558.027

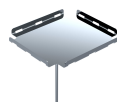

Defibrillator Tablett

H06-558.026



Sauerstoffflaschenhalterung

H06-558.025



Utensilien- / Wäschekorb

H06-558.024



HESS Stretchermatratze Soft

H06-558.014



Infusionsstange höhenverstellbar

H12-311



Kopfkissen mit Gegengewicht

H09-109.01



Klappbares Infusionsstativ

H06-558.020



Infusionsstange höhenverstellbar

H06-561.003



Halterung für Infusionsstange

H06-561.004



Mobiler Andockwagen «Provi-Dock»

PR-IDOCK410



Mobiler Andockwagen «Provi-Dock»



PR-IDOCK510




Mobiler Andockwagen «Provi-Dock»

PR-IDOCK610

OPTIONEN

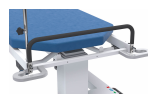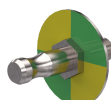

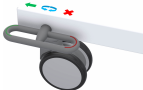ZPA Ausrüstung mit Anschlussbolzen POAG H06-552.01	ZPA-Verbindungsleitung mit POAG Buchse H06-552.02	Akkumodul für C-Bogen- und Röntgenliegen H06-558.001	Einteiliger Schiebegriff H06-558.002	Ausklappbare Schiebegriffe H06-558.003	PermaPressure 5th-Wheel H06-558.004	Papierrollenhalter H06-558.007	Seitengitter H06-558.010
							
Beidseitiges Rückenteil H06-558.011	Aufpreis für 4-seitiges Bremssystem H06-558.015	Zusätzliche Höhenverstellung seitlich H06-558.016	Trendelenburg-/Antitrendelenburgverstellung H06-558.018	Tiefere Einstiegshöhe H06-558.019	Höhenverstellung mit Handschalter H06-558.031	Funkfernbedienung zu Sonderliegen H06-558.032	Rundgalgen inkl. Halterung H06-558.034
							
Normschiene kopfseitig H06-558.035	H06-558.036	H06-558.041	Normschiene fussseitig H06-558.043	H06-558.044	Wandabweiserad H06-558.047		