
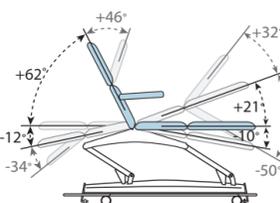
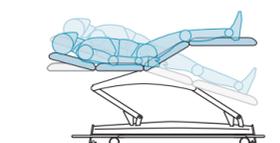
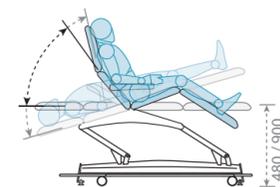


THERAPIELIEGE S8 luxury OP

Modell: **TMS8-LUX-OP**

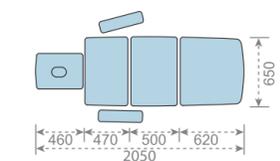

Handschalte
(Serienmäßig)

schmales Kopfteil mit
ovalem Nasenschlitz
und Einsatz



verstellbare Armstützen,
an der Normschiene
befestigt

Normschiene

schwarze, antistatische
Polsterung mit
Memory-Schaum

Einziehbare Antistatik-Rollen für
leichtere Umpositionierung der
Liege im Raum
(Ø 75 mm)

Rundumschaltbühgel

höhenverstellbarer
Infusionsständer
(Option)



Papierrollenhalter
am Untergestell
(Option)

Produktbeschreibung

Die **Therapieliege S8 luxury OP** hat eine **4-teilige** Liegefläche, die für kleinere Operationen und unterschiedliche ambulante Eingriffe bestimmt ist (Arthroskopie, Dermatologie, ästhetische Chirurgie, ...). Alle Teile der Liegefläche sind mit **Handschalte** elektrisch verstellbar, der eine im Voraus gespeicherte Liege-Lagerung und eine zusätzliche **Memory-Funktion** zur Speicherung von 2 beliebigen Positionen ermöglicht. Die Höhe kann während des Eingriffs mittels **Rundumschaltbühgel** von allen Seiten der Liege her angepasst werden, wodurch Ihre Hände frei und sauber bleiben.

Das **einfache Bedienen** der Liege und die **flexiblen Armstützen** ermöglichen Ihnen, dass Sie den Patienten in eine komfortable und vollkommen symmetrische Lage positionieren. **Das schmale Kopfteil** mit dem ovalen Nasenschlitz sowie dem **schlanken Unterbau** ermöglichen einen leichteren Zugang zum Patienten während des Eingriffs. Die Liegefläche ist für unterschiedliche Patienten geeignet, und hat eine **Tragkraft bis 240 kg**. Sie ist außerdem mit einem **Akkubetrieb** für den Fall des Stromausfalls ausgestattet.

Der Vorteil der Therapieliege S8 luxury OP liegt in der belastbaren und **äußerst komfortablen** einfach zu reinigenden und zu wartenden **Polsterung** der Spitzenqualität. Die Polsterung besteht aus widerstandsfähigem **schwarzem antistatischem Kunstleder**. Anstatt der antistatischen Polsterung können Sie optional jegliche andere Farbe des wasser- und feuerfesten Kunstleders der Topqualität aus dem Angebot von Novak M wählen.

Wegen ihres **festen Unterbaus** und ihrer **Gummistopper** ist die Liege während des Eingriffs äußerst stabil. Kleinere Umpositionierungen durch den Raum werden durch serienmäßig hinzugefügte **einziehbare Antistatik-Rollen** ermöglicht, die durch ein Fußpedal aktiviert werden. Zur einfacheren Gewährleistung der entsprechenden Hygiene ist der Unterbau mit einer **Abdeckung aus resistentem ABS-Kunststoff** mit zusätzlicher PMMA-Beschichtung gegen Abschürfungen geschützt.

Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis

	TMS8-LUX-OP
schwarze, antistatische Polsterung mit Memory-Schaum	8 cm
Liegehöhe	48-90 cm
verstellbare Armstützen, an der Normschiene befestigt	●
schmales Kopfteil mit ovalem Nasenschlitz und Einsatz	●
Normschiene am Rücken- und Sitzteil	●
einziehbare Antistatik-Rollen (Ø 75 mm)	●
Akkubetrieb	●
Papierrollenhalter am Untergestell	○
höhenverstellbarer Infusionsständer	○

Serienmäßig ● Option ○

OP HOCKER

Modell: **OP // OPN**



Produktbeschreibung

Der **OP Hocker** ergänzt das Angebot von Novak M für fachärztliche Untersuchungen und Behandlungen in kleineren Operationssälen. Da dieser Stuhl komfortabel, höhenverstellbar, um 360° drehbar und mit oder ohne Lehne verfügbar ist, bietet er eine gute Entlastung während der Arbeit.

Der Hocker ist mit dem Fuß höhenverstellbar, damit die Hände während der Arbeit frei und hygienisch sauber bleiben. Die serienmäßig **schwarze antistatische Polsterung** kann gegen jegliche andere Farbe des wasser- und feuerfesten Kunstleders der Topqualität aus dem Farbangebot von Novak M ausgetauscht werden.

Fünf antistatische Rollen mit weicher Lauffläche bieten eine gute Stabilität während des Eingriffs. Außerdem kann der Hocker sehr dicht an die Liege herangefahren werden und erleichtert somit ihre Arbeit.

Abmessungen

	OP (ohne Lehne)	OPN (mit Lehne)
Durchmesser	53 cm	53 cm
Durchmesser des Sitzes	36 cm	36 cm
Sitzhöhe	48-61 cm	48-61 cm
Höhere Sitzhöhe (Option)	54-73 cm	54-73 cm
antistatische Rollen	Ø 75 mm	Ø 75 mm

„Es ist unser Anliegen, dass unsere Kunden bereits beim ersten Besuch der Klinik von dem schönen Ambiente begeistert sind, denn dies steigert deren Vertrauen in unsere Fachärzte. Deshalb haben wir die Räume mit medizinischer Einrichtung der Spitzenklasse ausgestattet, die nicht nur über ein außerordentliches Design, sondern auch über eine Topfunktionalität verfügt.“

Bei der Liege von Novak M haben mich insbesondere drei Dinge begeistert. Die **Fußverstellung** der Therapieliege ermöglicht mir ungestörtes Arbeiten, denn meine Hände bleiben frei. Wegen des **Schmaleren Kopfteils** habe ich einfacheren Zugang zu den Patienten und kann diese dann mittels den **anpassungsfähigen Armlehnen** ganz einfach in eine vollkommen symmetrische Lagerung positionieren, was bei Schönheitseingriffen von wesentlicher Bedeutung ist.“

(Christian P., Schönheitschirurg)



Ambulante Operationen

