
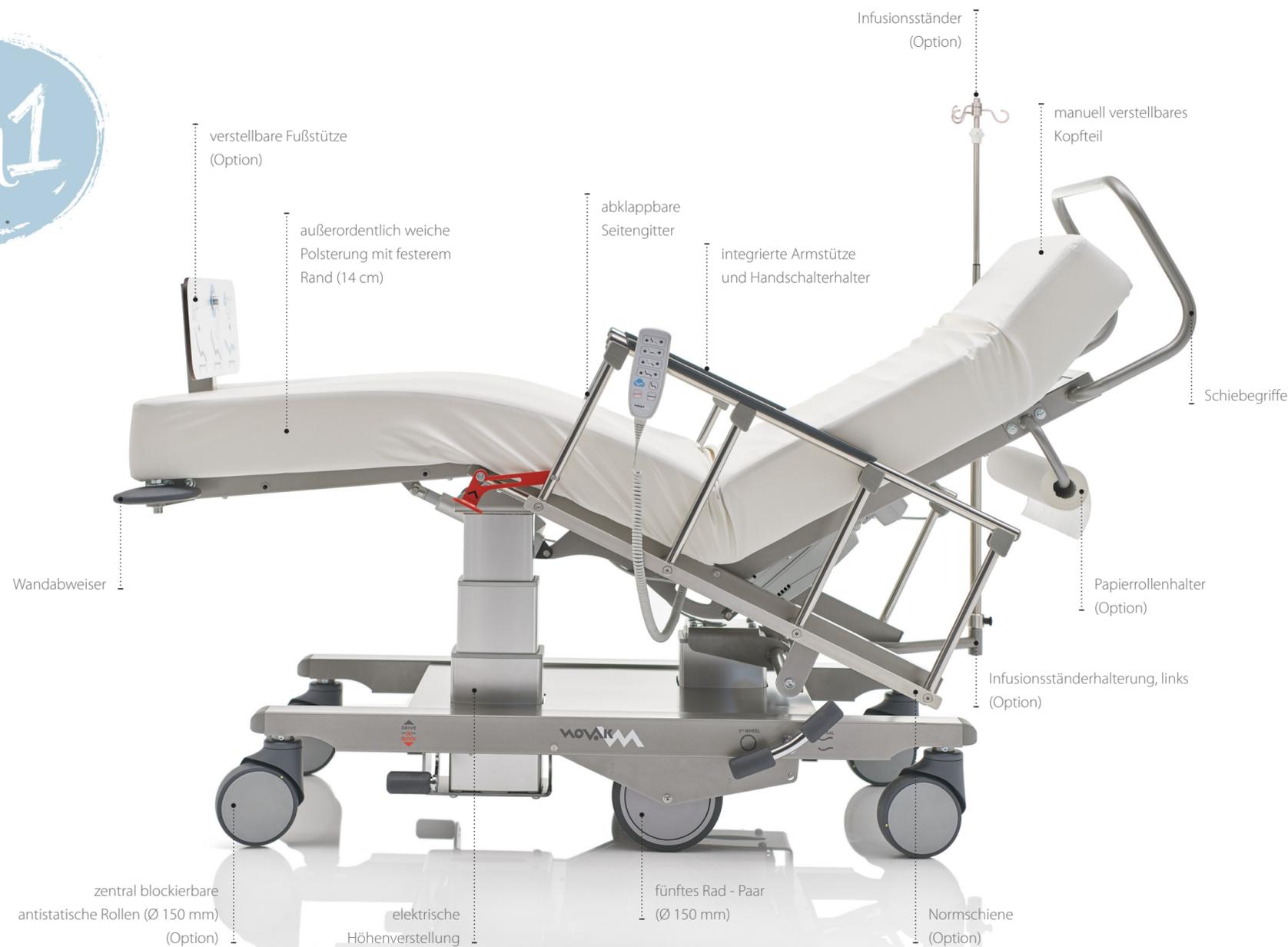


Tagesklinikstuhl ZeroG

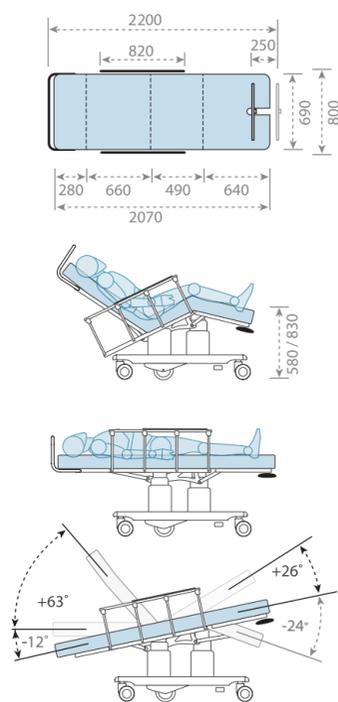

Der **Tagesklinikstuhl ZeroG** für den ambulanten Bereich, entstand als Antwort auf die neuesten Trends in der **ambulanten Chirurgie** und der **postoperativen Erholung**. Aufgrund seines Designs, das einen **leichten** und **schnellen Transport** von Patienten ermöglicht und die **postoperative Genesung unterstützt**, ist der Tagesklinikstuhl ZeroG für den ambulanten Bereich eine ideale Alternative gegenüber üblichen **PATIENTENTRANSPORTERN** und **KLINIKBETTEN**. Der Stuhl wurde konzipiert, um Patienten für den operativen Eingriff **vorzubereiten** sowie deren **Transport** und **Erholungsphase** nach dem operativen Eingriff **sicher und komfortabel** zu machen.

Leichter Zugang und Vorbereitung

Die Höhe des Tagesklinikstuhls ZeroG ist mittels Handschalter **elektrisch verstellbar**. Einer der wesentlichen Vorteile dieses Stuhls ist die **niedrige Sitzposition**, die dem Patienten einen einfacheren Zugang auf den Stuhl ermöglicht. Die **integrierten Armstützen** am Seitengitter ermöglichen medizinischen Fachkräften, ihre Patienten für den operativen Eingriff vorzubereiten. Der Stuhl kann in eine **vollkommen flache Position** verstellt werden; dadurch ist er perfekt für sämtliche Patientenbewegungen, vom Tagesklinikstuhl ZeroG auf jeglichen OP-Tisch und vice versa, geeignet. Der **Infusionsständer**, der entweder auf der linken oder auf der rechten Stuhlseite angebracht werden kann, wird stets **vertikal** platziert, unabhängig von der Stuhlposition.

Außerordentliche Mobilität und Agilität

Eine große Auswahl an intelligenten und einfachen Funktionen ermöglichen einfaches Schieben, Wenden und Fahren. Der Tagesklinikstuhl ZeroG verfügt über **zentral blockierbare Rollen**, welche von beiden Stuhlseiten verstellbar sind. Das **fünfte Rad** am Tagesklinikstuhl ZeroG ermöglicht ausgezeichnetes und einfaches Fahren, Schieben und Wenden. **Schiebegriffe** auf optimaler Höhe am Kopfende sorgen für einen sicheren Griff während des Fahrens, während **Wandabweiser** an den Fußenden-Ecken sowohl den Stuhl als auch den umgebenden Bereich vor Beschädigungen schützen.

Komfortable und sichere Genesung


Einfache Anpassungsmöglichkeiten des Tagesklinikstuhls ZeroG ermöglichen den Chirurgen, ihre Patienten nach dem operativen Eingriff **sicher auf den Stuhl zu transferieren** und sie in eine **optimale Lage** zu positionieren. Stabile und **abklappbare Seitengitter** auf beiden Seiten des Tagesklinikstuhls ZeroG schützen den Patienten vor Stürzen. Die **extrem weiche Polsterung** und **einfache Anpassungen** garantieren den Patienten erstklassigen Komfort während deren Erholungsphase nach dem operativen Eingriff. Die Patienten können den Tagesklinikstuhl ZeroG **selbstständig** in ihre Lieblingsposition **verstellen**. Durch Drücken der „**Cloud**“-Taste auf dem **Handschalter** können Patienten den Tagesklinikstuhl in die **ZeroG-Position**, die komfortabelste Position zum Ausruhen, **verstellen**. Zu jedem Zeitpunkt während der Erholungsphase kann der Handschalter sicher auf dem **Handschalterhalter** abgelegt werden; dieser ist zusammen mit den Armstützen am Seitengitter integriert.

Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis

	DHCZ
Stuhlhöhe - Polsterung miteingerechnet	58- 83 cm
Stuhlhöhe - Polsterung nicht miteingerechnet	44 - 69 cm
Tragkraft	250 kg
Schiebegriffe	●
Wandabweiser	●
abklappbare Seitengitter	●
integrierte Armstütze und Handschalterhalter	●
Papierrollenhalter (NZP2-Z)	○
verstellbare Fußstütze (FR-Z)	○
Infusionsständerhalterung, rechts (SIFH2-Z-R)	○
Infusionsständerhalterung, links (SIFH2-Z-L)	○
Infusionsständer (SIF1-Z)	○
Normschiene am Sitzteil (Paar) (LE2-Z)	○
schwarze antistatische Polsterung (APU-Z)	○
PVC-Schutzüberzug für Beinteil (PVC2-Z)	○
PVC-Schutzüberzug für Beinteil mit Fußstütze (PVC2-FR-Z)	○
fünftes Rad (Paar) (Ø 200 mm)	●
zentral blockierbare Rollen (Ø 150 mm)	●
zentral blockierbare antistatische Rollen (Ø 150 mm) (4 Stk) (AC3-CK-Z)	○
Akkubetrieb (BB-Z)	○

Serienmäßig ● Option ○

Farbkarte PU

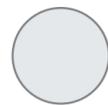-  231 light sky gray
-  132 sky blue
-  133 dark sky blue
-  PU black*

*schwarze, antistatische Polsterung (APU-Z) gegen Aufpreis





the comforts of medicine

[in](#) [f](#) Seien Sie Teil unserer Geschichte!

<p>Novak M d.o.o.</p> <p>Pod smrekami 5 SI - 1218 Komenda</p> <p>E: info@novak-m.si T: +386 1 5620117 F: +386 1 5620118</p> <p>www.novak-m.com</p>	<p>Novak M Swiss GmbH</p> <p>Kanalstrasse 6 CH - 8953 Dietikon</p> <p>E: info@novak-m.ch T: +41 71 440 18 18 F: +41 71 440 18 17</p> <p>www.novak-m.ch</p>	<p>Novak M Deutschland GmbH</p> <p>Kleines Feldlein 4 DE - 74889 Sinsheim</p> <p>E: info@novak-m.de T: +49 7261 663 2101</p> <p>www.novak-m.de</p>
---	--	--



Ambulante Operationen

